

出展企業 帝人メディカルテクノロジー株式会社


UKフェア2022 展示品のご案内

TEIJIN



吸収性歯科用骨再建インプラント材（歯科用）

GRタックピン

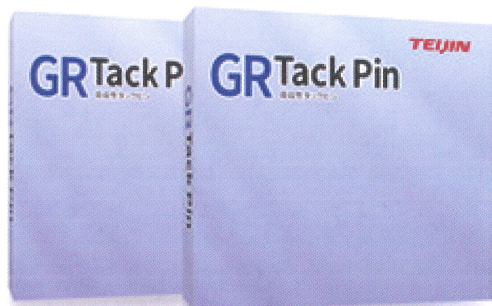

L-乳酸グリコール酸共重合体（PLGA）の表面に着色（紫）をした材料で、歯槽骨および顎骨の骨欠損部に用いられるメンブレンの固定を目的とした吸収性素材のタックピン


口腔内での狭い術野の手術では固定箇所の制限を受けるため、ヘッド幅を狭く且つ、全長も短くして固定が行い易いよう設計しています。GRタックピンの挿入は専用ドリル先を用いて骨孔を作製し、専用把持器で把持をしたGRタックピンを予めメンブレンに開けた孔から押し込んで挿入しメンブレンを固定することができます。

- ◆ 粘膜組織からの突出を極力抑えています。
- ◆ 樹脂固有の靱性があり折れや曲がりのリスクを軽減します。
- ◆ 生体内で分解吸収するため、除去目的の手術が不要です。

GRタックピンは着色されているため狭い術野に落ちた際に視認しやすくなっています。吸収性の固定材料を用いることにより、抜去目的の手術が不要となり、患者さんへの負担が軽減できる特徴的な製品でQOL向上に寄与します。

承認の概要

- ◆ 承認日
令和3年8月12日
- ◆ 承認番号
30300BZX00228000
- ◆ 販売名
GRタックピン
- ◆ 一般的名称
吸収性歯科用骨再建インプラント材

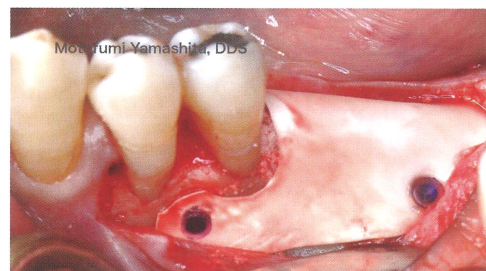

承認された内容

- (1) 形状、組成
L-乳酸グリコール酸共重合体（PLGA）
法定色素 紫色201号（着色剤、微量）
メンブレンを歯槽骨に固定できる形状です。
- (2) 使用目的
歯槽骨および顎骨の骨欠損部に用いられるメンブレンの固定に使用します。



担当者より
ひとこと

GBRにおけるメンブレン用吸収性固定ピンは国内では唯一この製品のみであり、金属製ピンのように術後除去する必要がありません。ブースでの固定体験をぜひお楽しみください。

GBR推進チーム
福岡 克典 中村 幸寛

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】9:00～17:30（土日祝を除く）

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

