

新時代へ、新たな挑戦！ ～歯科医療への感謝を込めて！～

グランメッセ熊本

To A New Era! New Challenge!

出展企業紹介

出展企業 株式会社デントロニクス

## Dentronics



UKフェア2022 展示品のご案内

新商品 入れ歯洗浄剤

## デントロクリーンムース

義歯安定剤の除去に優れた能力を発揮する、ムースタイプの入歯洗浄剤です。強力洗浄で特にクリームタイプの安定剤を溶解除去でき、入れ歯の洗浄が容易です。フルデンチャー、パーシャルデンチャー、ノンスクラブデンチャーに使用可能で、さらに入れ歯だけでなくマウスピース、矯正用リテーナー等幅広い口腔内装着具で安心してお使い頂けます。






### Test 1



未使用

デントロ  
クリーンムース


他社のムースタイプ  
義歯洗浄剤

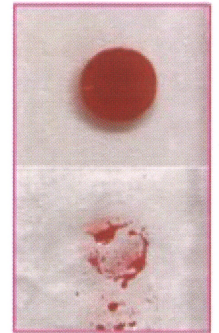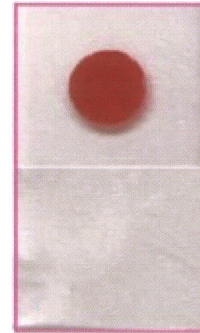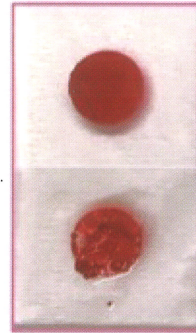

- 用意したアクリル板に着色した市販の義歯安定剤をモールドを使用して均一に伸ばした。
- 約23℃に調整した水、デントロクリーンムース、市販の義歯洗浄剤に浸漬した。
- 浸漬後、アクリル板を引き上げて試料上に残った義歯安定剤を撮影した。

- 内容量 150ml (1本)
- 患者様価格 1,200円

### Test 2

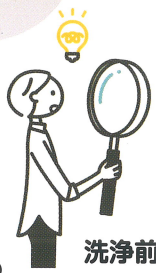

洗浄前





洗浄後

- 用意した部分床義歯に着色した市販の義歯安定剤を手指にて薄く延した。
- 常温の水道水150mlに5分間浸漬した。
- デントロクリーンムースと市販の義歯洗浄剤を義歯上に塗布した。
- 義歯ブラシにて30回擦った後、流水でかるく流したものを撮影した。

デントロ  
クリーンムース

他社のムースタイプ  
義歯洗浄剤

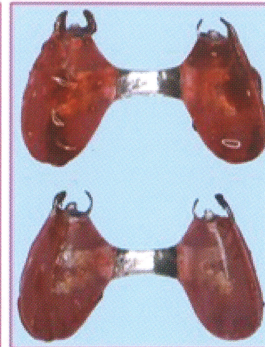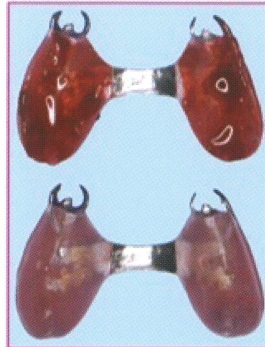

資料提供  
鹿児島大学大学院歯学総合研究科  
先進治療科学専攻  
顎顔面機能再建学講座  
口腔顎顔面補綴学分野  
原田佳枝先生

※写真の色は、印刷のため実物と多少異なることがあります。  
※仕様・外観・価格は、予告なく変更することがあります。



小川 慎二

担当者より  
ひとこと

ひさびさのビックイベント「UKデンタルフェア」！  
平成28年熊本地震、コロナ禍を乗り越えた先生方にお会いできる事、  
楽しみにしております。

歯科医療器械・器具・材料のフルサービスディーラー

株式会社UKデンタル

熊本店・鹿児島店・久留米店・福岡店・長崎店・宮崎店・大分店

【受付時間】 9:00～17:30 (土日祝を除く)

UKデンタルHPもご覧ください

<http://www.ukdental.co.jp>

ユーケイデンタル

検索

