

MONTHLY — 2024 — No.64
ORIGINAL CAMPAIGN

11 月号

2024年10月21日～11月20日は下記商品を期間限定 **特別価格** にてご奉仕いたします。

キャンペーン期間 2024年10月21日～11月20日まで

※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

今月の厳選商品 充填・支台築造用ファイバー強化型フロアブルコンポジットレジン

エバーエックス フロー

保険適用

ショートファイバー配合により象牙質に近い物性を有する
デンチンリプレイス材料（デンチンに近い物性）

定価 ￥5,800（税抜）

管理医療機器 306AKBZX00025000

POINT ①


ショートファイバー配合

Optimal Aspect Ratio(OAR) テクノロジーを駆使し、レジンマトリックス部から
ファイバーへの効果的な応力移転によるコンポジットレジンの高い強度を発揮


※Optimal Aspect Ratio(OAR) テクノロジー

ファイバーの直径と長さの調整により、破壊靱性と操作性の適度なバランスを発揮するテクノロジー


歯質や材料自体の破折リスクの低減が期待できます。

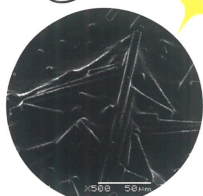


SEM画像提供：Lippo Lassila先生（University of Turku, Finland）

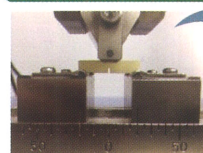弾性のあるガラスファイバーの緩衝作用により
クラックの伝搬を抑制する

破壊靱性試験

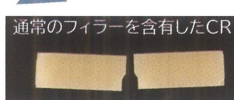

通常のフィラーを含有したCR

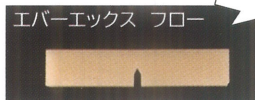

エバーエックス フロー

破壊試験後の試験片の状態

クラックの伝播
を抑制!!

術者

抜歯処置への移行が減少し、
必要最小限の処置ができる。

患者

自身の歯質を保存でき、
治療の負担が少なくなる

POINT ②


ペースト性状

適度なチキソトロピー性を有する
ため、狙った部位で利用できる。填入時は
垂れずに
盛り上がるチップ先端でペ
ーストを振動を
加えると馴染む

POINT ③

シェード

バルク（硬化深度5.5mm）

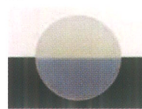深い窩洞や積層回数を減らして素早く充填したい
場合に適した、バルク充填可能なシェード

デンチン（硬化深度2.0mm）

審美が求められる症例やセラミックス修復時の
コアビルドアップに適した歯冠色シェード

UK & GCオリジナルキャンペーン 11月号『エバーエックスフロー』 注文書

キャンペーン期間 2024年10月21日～11月20日

※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

商品名 **エバーエックス フロー バルク**1函（各色）：シリンジ 3.7g（2.0mL）1本、フィリングチップⅢ プラスチック3個
フィリングチップ用キャップ1個、テクニックガイド1部

数量

函

貴院名

商品名 **エバーエックス フロー デンチン**1函（各色）：シリンジ 3.7g（2.0mL）1本、フィリングチップⅢ プラスチック3個
フィリングチップ用キャップ1個、テクニックガイド1部

数量

函

担当営業名

詳しくは担当営業までお問合せ下さい。

UK DENTAL