

UK & GC MONTHLY - 2024 - No.61 ORIGINAL CAMPAIGN

UK DENTAL 2024-26-④

8
月号

2024年7月22日～2024年8月20日は下記商品を期間限定 **特別価格** にてご奉仕いたします。

キャンペーン期間 ※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

2024年 7月22日～2024年 8月20日まで

今月の厳選商品 多目的光重合型1液性ボンディング材

G-Premio BOND


G-プレミオ ボンド 2本包装

包装 2本包装1函：G-プレミオ ボンド (5mL) 2本


1ボトルで様々な症例に活躍の「マルチユース」

コンポジットレジン修復だけではなく、様々な補綴物の口腔内リペアー、露出した象牙細管を確実に封鎖することによる知覚過敏抑制など、ボンディング材としての臨床用途が広がりました。

コンポジットレジン修復

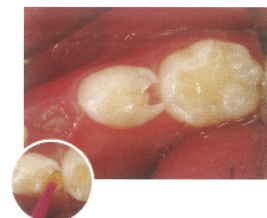

口腔内リペアー

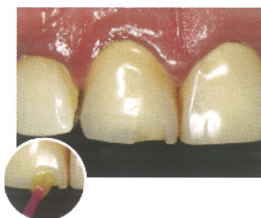

知覚過敏抑制




塗布後待ち時間「0秒」でも、高い接着力

臨床実績があるリン酸エステル系モノマー「MDP (10-methacroyloxydecyldihydrogen phosphate)」とカルボン酸系モノマー (4-MET) を配合することにより、エナメル質、象牙質と共に強固に接着。溶媒に揮発性の高いアセトンを使用することにより、ボンディング層から水を効果的に除去。また、親水性の高いHEMAを配合していないため吸水しにくく、長期的な接着耐久性が期待できます。

各種補綴物への長期的に安定した接着力

リン酸エステル系モノマー配合により非貴金属や金属酸化物であるジルコニア、アルミナに、また、新規チオリン酸エステル系モノマー (MEPS) 配合により貴金属にも接着します。ハイブリッドレジンやセラミックスには、「ジーシー セラミックプライマーII」の併用で強固な接着が可能。口腔内リペアーに使用できます。

審美性を追求し
3μmのボンディング層を実現

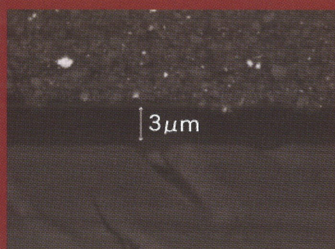


SEM画像(×5000)

コンポジット
レジン
ボンディング層
象牙質

多数歯充填を可能にした
操作余裕時間7分

7
min.

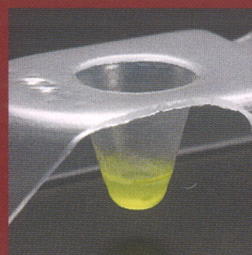

当社で最もご購入いただいている
ボンディング材です。

支持率
ナンバー



1

※当社ボンディング材販売実績による

歯科用象牙質接着材 (歯科金属用接着材料 / 歯科セラミックス用接着材料 / 歯科用知覚過敏抑制材料 / 歯科用シーリング・コーティング材 / 歯科用充填・修復材補助器具管理医療機器) ジーシー G-プレミオ ボンド 管理医療機器 226AABZX00098000

UK&GCオリジナルキャンペーン 2024年8月号『Gプレミオボンド 2本包装』注文書

キャンペーン期間 2024年7月22日～8月20日 ※キャンペーン最終日は午前10時までの受注分までとさせていただきます。

商品名

G-プレミオ ボンド 2本包装

包装●2本包装1函：G-プレミオ ボンド (5mL) 2本 標準価格 ¥29,870 (税抜)

数量

貴院名

担当営業

UK DENTAL 詳しくは担当営業までお問合せ下さい。

