

UK UK REPORT

@New Products

LUVIS 天吊りダブル ・ビルトインカメラ仕様/ヨシダ 〈LED手術灯〉



ヨシダから発売の「LUVIS LED手術灯」に新たに“天吊りダブル・ビルトインカメラ仕様”がランナップになり、様々なニーズに対応でき、より快適な手術環境を提供します。

【特徴】

- ハイブリッドLED光学システムにより、より低い熱放射に直結する省エネルギー性能を実現しました。エネルギーや熱の消費が少ないにもかかわらず、色温度調整や焦点サイズなど、さまざまな機能を可能にしています。
- 750nm以上の赤外線を出さないように設計されたLUVIS手術灯では、患者の頭部付近の上昇を抑えます。また、患部の乾燥を防ぐことができるので、より快適な手術環境を提供します。
- S200、M200、M210、L200等のタイプをダブル灯として組合せて6種類をランナップ。



標準価格＝本体一式 1,150,000円
～3,550,000円
ビルトインカメラ1,200,000円

S-MAX M シリーズ/ナカニシ 〈歯科用エアータービン〉



ナカニシから発売された“S-MAX Mシリーズ”は、給排気をつかさどる新開発の「3X-Power System」により、エアーを効率よく出力に変換でき、従来の20Wから26Wへの大幅なパワーアップを実現させた歯科用エアータービンです。優れた操作感とより繊細な施術を可能にする切削感が得られます。

【特徴】

- ノズル構造を最適化し、整った空気の流れを生み出し、空気のロスを低減。空気力を高効率で回転力に変換します。
- 空気を受ける面積が従来比100%アップ(2倍)し、広いバケット面で無駄なく空気を受けて高トルクを実現します。
- 拡大した排気溝でバケットが受けたエアーを速やかに排気。スムーズな排気により、低回転速度域のトルクが向上します。
- ポディーの素材にはサビに強く頑丈なステンレスを採用し、手に馴染む梨地仕上げです。
- 3ステップで簡単に交換可能なカートリッジを採用。

標準価格＝ライト付 103,000円
ライト無 78,000円

TMR-MTA セメント ミエール /YAMAKIN 〈歯科用覆髄材〉



YAMAKIN から発売された歯科用覆髄材“TMR-MTA セメントミエール”は、MTA セメントをもっと手軽に、もっと幅広く使えるよう製品設計し、従来品からのX線造影性を強化することでレントゲンやCTで観察しやすくなりました。

【特徴】

- ジルコニア量を増加させ最適化することで、X線造影性が当社従来品より60%向上。レントゲンやCTによる観察が容易になりました。
- X線造影剤には、歯科材料や人工関節など、生体に広い使用実績のあるジルコニアを使用。化学的に安定なため変色が起こりにくい素材です。
- ジルコニア微粒子と球状シリカ粒子のヘアリング効果により、流動性が向上し、短時間の練和で均一なペースト状になります。
- 少ない水の量で練和できるため、硬化が速く水分率が20%の場合、初期硬化が15分～30分で完了します。また、硬化が速いため、練和1日後から高い圧縮強さ(約90MPa)を実現します。さらに1週間後140MPaまで上昇し、ガラスイオノマーセメントに匹敵する圧縮強さが得られます。
- ホワイトとライトアイボリーの2色。

標準価格＝マイクロチューブ入
(0.2g×3) 3,600円
3gピン入 7,500円
10gピン入 15,000円

@My Recommendation

『eバイト3』 〈ニッシン〉



標準価格＝本体一式 29,800円

充電式コードレスLED照明器!

今回ご紹介させていただく商品は、(株)ニッシンから販売されております充電式コードレスLED照明器「eバイト3」です。

特徴と致しましては、

- ①クリップ式になっており、お手持ちのメガネやゴーグルに取付可能。
- ②照射角度が上に15度、下に30度調節が可能。
- ③バッテリーは1時間でフル充電でき最長3時間半の連続使用が可能。
- ④コードレスLED照明器は10万円前後の物が主流の中、3万円を切る低価格。

ご使用いただいている先生からは、「訪問診療や検診で重宝している。今までは片手でライトを持って片手からさかっていたが、両手が空くので助かっている。」とお言葉をいただいております。もちろん診療室でもお使いいただけますので、ぜひご相談ください。

長崎店 営業一課 山田 茂春

@New Books & Video

★今週の新聞

『患者さんに伝えたい 摂食嚥下のアドバイス 55のポイント』



摂食嚥下医療において、患者さんと家族に伝えたいコツや技、理解してもらいたいポイントをわかりやすくまとめ、摂食嚥下障害の理解を深める55のポイントについては、すべてを見開き2ページで掲載し、わかりやすく解説した一冊。

- 編 = 野崎 園子 / 西口 真意子
- 著 = 関西労災病院嚥下チーム
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 3,400 円 + 税


Welcome to Dental Office デンタルオフィスコンシェルジュ 『歯科医院の受付は賢く・優しく・美しく』 ～患者様を迎えるあなたへ～



歯科医院の受付としての「こころ構え」や「仕事の進め方」に加え、患者様をいかに迎えるか、一人の受付としてどのように成長するかなど、さまざまな内容をアップデートした一冊。受付として働く入門書として最適な書。

- 著 = 林 美穂 / 下釜 祐子
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 3,600 円 + 税

『内科医から伝えたい 歯科医院に知ってほしい糖尿病のこと その2』

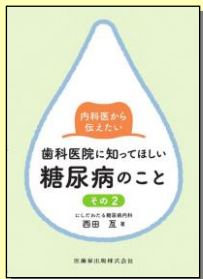

歯周病が全身に与える影響を「慢性微小炎症」の視点から解説し、「歯周炎分類2018」の正しい捉え方や、早期糖代謝以上に関わる糖尿病予防認定衛生士の重要性を紹介。また、新診療報酬「診療情報連携共有料」についても徹底解説。歯科医院だからこそできる糖尿病予防を内科医がやさしく解説した一冊。

- 著 = 西田 亙
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 3,200 円 + 税

『お口のトラブル解決します！』 ～補綴歯科へようこそ～



補綴歯科ってなに？そんな疑問に日本補綴歯科学会が全力で答えた歯科医院待合室必備な書。オーケストラでいうとコンサートマスター、建築ならば大工の棟梁のような立場で、歯科の治療の設計をし、実際の治療もする診療分野を患者さんにもっと理解していただくよう工夫された一冊。

- 編 = 公益社団法人日本補綴歯科学会
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 3,300 円 + 税


『顔美学』 ～見られる顔から見せる顔へ～



顔の各部位の持つ意味論、顔の全体的な美認識にも触れながら、顔の表情、魅力といった動的な美、美の経年変化等についてもわかりやすく解説。「顔美（顔の美）」という未完の分野に一石を投じる意欲的な一冊。

- 著 = 押田 良機
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 3,800 円 + 税

日本歯科評論 別冊 『歯科診療の幅を広げる医科との連携』 ～保険算定要件から治療対応のポイントまで～

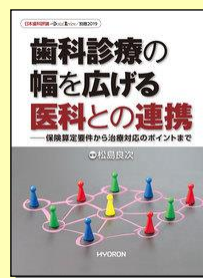

全身疾患を抱える患者さんへの歯科診療を安全に実施するため、医療連携が必須の時代。これを促進する様々な歯科保険診療の項目が設定されています。これらの保険診療項目について、算定要件の概要や医科との連携のポイント、実際に連携に取り組んだ事例などを紹介した一冊。

- 編著 = 松島 良次
- 出版 = ヒョーロン・パブリッシャーズ
- 価格 = 5,800 円 + 税

『快適医院をつくるインテリア医学』 ～もっと心地良く！もっと使いやすく！～



「患者さん、医療スタッフともに、快適に過ごせる空間づくり」を目指す医療施設や介護施設向けに、床などの建材の選び方から、インテリアの選び方・飾り方、作業効率上がる収納・整理法、さらに開業・リニューアルで抑えるべきポイントまで、わかりやすく解説した一冊。

- 著 = 水口 真理子
- 出版 = 日本歯科新聞社
- 価格 = 8,000 円 + 税

『ななちゃんのはみがき』



歯を大切にすることと虫歯ができる過程、磨き残しのない歯の磨き方を、はみがきのキャラクターたちと「はみがきの歌」にのせて楽しくわかりやすく伝えたいはみがき絵本。

- 著 = つがねちかこ
- 出版 = 赤ちゃんとママ社
- 価格 = 1,000 円 + 税