

UK

UK REPORT

New Products

S-Max M micro / ナカニシ
＜歯科用エアータービン＞

ナカニシから 11 月 2 日に発売される“S-Max M micro”は、φ9.0のミニヘッドにクラストップレベルの20Wのハイパワーを実現したエアータービンです。100°ヘッドアングルによる高いアクセス性で、使いやすさを追求し、クリーンヘッドシステムでサックバックを防ぎ、新搭載のクイックストップで口腔内の安全性を向上。小さなボディに大きな技術革新を秘めた、次世代のハンドピースです。

【特徴】

- φ9.0×H10.8mmのミニヘッドを実現し、100°アングルヘッドが臼歯部へスムーズにアクセス。ミニヘッドのため広い視野を確保することができます。
- 独自の技術である3X-Power Systemを搭載することで、ミニヘッドでも20Wの高トルクを実現。切削での様々な施術に貢献します。
- 最高回転から約1秒で急停止するクイックストップ機能を搭載。口腔内での巻き込み防止等の安全性が向上しました。
- ナカニシ独自のラビリンス機構により、エアータービンへのサックバックを大幅に軽減します。
- カートリッジはその場で簡単に交換できる仕様なので、修理に出す時間とコストを抑えます。また、水回路の清掃やお手入れも簡単に行えます。
- さまざまなメーカーのユニットに接続するための、各社カップリングに対応したモデルをラインナップしています。

標準価格＝

M micro (ライト付) 103,000円

オムニクロマ
/ トクヤマデンタル
＜歯科充填用コンポジットレジン＞

トクヤマデンタルから 10月21日発売の“オムニクロマ”は、コンポジットレジンで初めて構造色を使用し、非常に幅広い色調適合性を実現したコンポジットレジンです。シェードがないため、充填するシェードを選択する必要がなく、オムニクロマ自体が幅広い歯質の色調に同化します。

【特徴】

- 構造色とは光の波長以下の微細構造による光の分光により発色する現象で、歯科用コンポジットレジンでは初めて、「顔料」を使わず構造色によって天然歯の色調を再現しました。
- 硬化前のペーストは白色不透明で、歯質との識別が容易です。硬化後に窩洞の色調に同化して、自然な外観となります。
- オムニクロマフィラー（260nmの均一サイズのスーブラノ球状フィラー）が発現する赤から黄色の構造色により、周囲の歯質の色に同化することができます。
- 周囲に歯質のない大きなⅢ、Ⅳ級直接修復や変色歯質・金属色の遮断をしたい場合は、オムニクロマを充填する前にブロッカーや色調遮断用の材料を充填することで効果的な色調再現性を可能にし、より多くの症例に対応します。

標準価格＝

オムニクロマ4g (2.2ml) 3,900円
ブロッカー4g (2.1ml) 3,900円ムーシールド ムータン
/ JM オルソ
＜反対咬合用オーラルシールド＞

JM オルソから発売された反対咬合用オーラルシールド“ムーシールドムータン”は、従来のムーシールドよりも柔軟性のある素材を使用し、機能や効果はそのままに、従来のムーシールドにはないエクストラスマールとラージを追加ラインナップしました。

【特徴】

- ムーシールドは不正咬合治療を目的とした歯列矯正装置で、本品を装着することで顎が正常に成長するように促します。
- 従来のムーシールドはPMMA、ムータンは熱可塑性ポリウレタンを材質に採用し、ムータンはより柔軟性に優れており、咬耗に強い素材です。
- エクストラサイズは、乳歯列期（3歳～4歳位）の反対咬合の早期初期治療に適応します。ムーシールドSが大きすぎるケースやムーシールドSの導入装置に最適です。
- ラージサイズは、第一大臼歯萌出期以降（7歳～11歳位）の反対咬合の第1期治療に適応します。ムーシールドMがサイズアウトしたケースや反対咬合治療の保定期に最適です。

標準価格＝ムータンXS 8,000円
ムータンL 8,000円

My Recommendation

『マスクにくっつくアイガード』
＜3M ジャパン＞

標準価格＝20枚入 2,800円

歯科用アイガード！マスクへの着脱を簡単に！

今回ご紹介させていただく商品は、3M ジャパン(株)より発売されております『マスクにくっつくアイガード歯科用』です。マスクにくっつくアイガード歯科用は、マスクや手袋のような手軽に取り出し、ご使用のマスクに簡単にくっつくアイガードです。装着時にフィルムが曇りにくい曇り止め加工フィルムを採用しており、クリアな視野でつけ心地がとても快適です。また3M独自の“メカニカルファスナー”技術により、マスクの不織布面に絡みついて簡単装着を可能に致しました。マスクへの装着位置の調整も簡単にメガネの上からの装着も可能になっております。使用後はマスクと一緒に廃棄するだけで管理が簡単です。

ご採用頂いております医院様からは、「フィルムは軽いし、装着も簡単で視界はハッキリしています。飛沫防止に最小限の大きさでも満足しています。」とのお声を頂いております。只今、当社オリジナルのBoost企画キャンペーンとしてお求めやすい価格で販売いたしております。是非ともこの機会にお試しくさいますようお願い致します。詳細につきましては弊社営業担当者までお尋ねください。

熊本店 営業二課 下酔尾 美博

@New Books & Video

★今週の新聞

『増補新版 インプラントセラピー』
～臨床的アプローチと成功の根拠 第2版～



インプラント業界をリードする世界のエキスパート 75 名が、その知識、技術、そしてフィロソフィーを惜しみもなく披露した一冊。適切な埋入ポジション、硬・軟組織の増生、サイナスフロアエlevation、無歯顎補綴、インプラント周囲炎、長期メンテナンス、合併症など、全分野を網羅。もちろん、最新の情報とテクニックも掲載した、最高水準のインプラント治療の書。

- 著者=Myron Nevins/Hom-Lay Wang
- 監訳=小野 善弘/窪木 拓男
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=36,000 円+税

『歯周病およびインプラント周囲組織の疾患と状態に関する新分類』
～アメリカ歯周病学会(AAP)/ヨーロッパ歯周病連盟(EFP)共催
2017 ワールドワークショップ会議録～



アメリカ歯周病学会・ヨーロッパ歯周病連盟共催による 2017 ワールドワークショップの会議録で、歯周病学・インプラント学の専門家によるレビューおよびコンセンサスレポートの全訳を収録した一冊。

- 共著=Kenneth S.Korman
Maurizio S.Tonetti
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,800 円+税

別冊ザ・クインテッセンス
『歯科ITサービス入門』
～レセコン、予約システム、自動的銭機の最新線～



歯科医療情報のIT化により生まれたサービス、具体的にはレセコンや予約システム、自動的銭機などの最新IT製品を特集し、クリニックでの実際の活用事例や導入メリットについて詳細に解説した一冊。各社レセコン、予約システムのランニングコストがわかる巻末付録付き！

- 編 =クインテッセンス出版
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=5,000 円+税

『エビデンスと解剖に基づいた臨床歯科麻酔学』



臨床解剖とエビデンスにより、日常臨床で必須な局所麻酔をブラッシュアップ。高齢社会でさらに重要となる全身疾患への注意点などの再確認に役立つ実践書。局所麻酔の見直しとレベルアップにつながる一冊。

- 編 =岩永 譲/嘉村 康彦/田中 毅
- 出版=医歯薬出版
- 価格=13,000 円+税


『スーパー図解 補綴治療！』
～クラウン(天然歯&インプラント)、ブリッジ、ラミネートベニア、インレー～



「ワンランク上の補綴治療を患者さんに」と日々診療に向き合うすべての臨床家に使ってほしい、患者向け補綴治療ガイドブック「治療説明の虎の巻」。お口の美と健康、良好な予後を生む補綴治療はどこがどう違うのか？歯科医師は何に手問をかけ苦心しているのか、そしてその理由とは？補綴の基礎の学びはもちろん、カリスマ歯科医師の洗練された説明力と、本格的な治療説明用図解した一冊。

- 著 =土屋 賢司
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=8,800 円+税


別冊 QDT
『歯科医師・歯科技工士のための最新ラミネートベニア』
～現在の到達点～

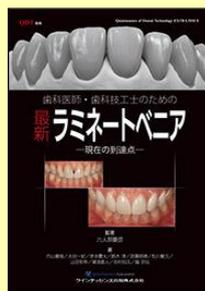

今や臨床に不可欠な技法となったラミネートベニアについて、歯科医師向けには症例選択から支台歯形成、そして印象採得や装着に至る具体的な方法を示し、また歯科技工士向けには耐火模型法とプレス法の基礎から応用までを完全網羅。チェアサイドもラボサイドでも満足できるラミネートベニア情報の宝庫の書。

- 監著=六人部 慶彦
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,000 円+税

『チームで取り組むインプラント周囲組織の診査・診断・対応法』
～システムティックに行うメンテナンスプログラム～

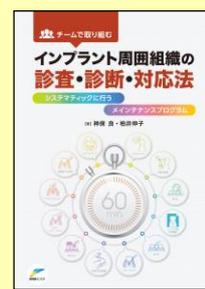

本書は、インプラント周囲疾患としてインプラント周囲に発症する異常を広くとらえて診査・診断する知識と能力を向上させるために、臨床写真などの画像を豊富に用いてわかりやすく解説した一冊。インプラントの長期予後を支える新しいバイブル書。

- 著 =神保 良/柏井 伸子
- 出版=インターアクション
- 価格=6,800 円+税

『写真でわかる子どもの矯正治療ガイド』
～お子さんの口の中、こうなっていますか？～



子どもの歯並びや生え替わりの問題を 20 症例とりあげ、不正咬合やその治療についての説明に活用できる一冊。また、年齢別のチェックポイントや矯正装置の種類、歯並びに影響する生活習慣も紹介。

- 著 =石川 基
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,600 円+税