

UK

UK REPORT

New Products

Aadva GX-100 3D/ジーシー
＜アーム型X線CT診断装置＞

ジーシーから発売された“Aadva GX-100 3D”は、CBCT、パノラマ、セファロ撮影が可能な3 in 1タイプのX線撮影装置です。ST仕様とMX仕様の2つのモデルから目的に合った装置を選択できます。エンド、ペリオなどの日常臨床から、インプラント治療や矯正治療などの様々な歯科治療において正確で詳細な診断画像を提供します。

【特徴】

- 様々なFOVサイズを有し、顔面全体、上顎洞、顎関節、顔面の非対称性の左右頬骨確認など、診断目的に応じてFOVサイズを選択することができます。最大の23×24cmFOVサイズ。(MX仕様・オプション)
- SMARF機能のより、補綴物による金属アーチファクトの影響を最小限に抑え、最適な画像が得られます。
- パノラマモード専用のマルチフォーカス機能を搭載。異なる5つの断層域の画像から焦点が最適化されたパノラマ画像を選択します。
- セファロ仕様はスキャンタイプとワンショットタイプから選択できます。

標準価格=3D ST モデル 8,800,000 円
3D MX モデル 9,800,000 円
※セファロ仕様は別途価格

ネオザロカイン®パスタ ラミネートチューブ/ネオ製薬工業
＜歯科用表面麻酔剤＞

ネオ製薬から発売の歯科用表面麻酔剤「ネオザロカイン®パスタ」が、基本性能はそのままだけに、使いやすさにこだわったラミネートチューブタイプの新仕様でリニューアル発売されました。ラミネートチューブの採用により、最後まできれいに使い切ることができます。

【特徴】

- アミノ安息香酸エチル 25%だけでなく、作用時間の長いテールカインを5%配合。迅速な麻酔発現と適度な持続時間を有します。
- 先端ノズルが細く、より無駄なく必要量を取り出すことができます。
- 綿球への付着性を考慮した程よい流動性に改良され、より使いやすくなりました。
- 操作性の良い水溶性のパスタです。
- ライトイエローのペーストで、識別性を落とすことがない、淡い色調です。
- 甘すぎず大人から小児まで使用できるフレッシュなラズベリーフレーバーです。
- 有効成分(100g中)：アミノ安息香酸エチル 25g、パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩(テールカイン) 5g。

標準価格=15g チューブ入 2,200 円

ワックスレトリック ライト
/日本歯科商社
＜電気ワックスペン＞

日本歯科商社から発売されている電気ワックスペン「ワックスレトリック」(レンフェルト社製)に、ダイヤル式で温度設定ができる“ワックスレトリックライト”が新たにラインナップされました。2本のハンドピース仕様、ならびに1本のハンドピース仕様の2つのモデルをラインナップし、ダイヤル式で50℃~200℃まで、簡単に温度設定ができます。

【特徴】

- チップ内にヒーターエレメントがあるため、熱が直接ワックスに伝わりやすいため、設定した温度とチップ先端温度差がほとんどありません。また、ハンドピースが熱くならず快適に作業が行えます。
- ハンドピースは天然コルク製で、長時間使用しても疲れにくい設計です。
- インスツルメントの加熱時間が必要ないため、モデリング時間を約20%節約できます。
- 12種類の豊富なチップをランナップ(オプション)しています。
- 別売のホルダーセット(チップ&ハンドピース)が取付可能です。
- 安心の3年保証付。

標準価格=2ハンドピース仕様 46,000 円
1ハンドピース仕様 34,000 円

My Recommendation

『シルカラリ』
＜名南歯科貿易＞

標準価格=本体一式
(トレイ5枚付) 9,800 円

じっくり、しっかり、そして手軽に、ドライ!

今回、ご紹介させていただきますのは、名南歯科貿易から発売されておりますシルコニア乾燥器『シルカラリ』です。製品の特徴として、①70℃まで調整が可能で、用途に応じて温度を設定できます。②ファン内蔵型なので、熱風が循環することで隅々までムラ無く乾燥できます。③トレイは直径320mmのたっぷりサイズで、模型からディスクまで楽々入ります。④使用例も以下の通り様々な用途に利用できます。

- 【使用例】
- 3Dプリンター積層物のリンス処理後の乾燥(推奨温度40℃)
 - シルコニア着色料の乾燥(推奨温度70℃)
 - 石膏模型の乾燥(推奨温度40℃)
 - オートクレープ後の滅菌パックの乾燥(推奨温度70℃)


ご購入していただき、オートクレープ後の乾燥に使用いただいております医院様では、「トレイが大きくて滅菌後の滅菌パックの乾燥が容易にできるようになった。」という声をいただいております。詳しい内容に関しましては弊社営業担当者までお気軽にお問合せください。

熊本店 営業三課 宮野 孝徳

@New Books & Video

★今週の新聞

『デンタル・ビジュアルライゼーション』
～臨床に役立つデジタル歯科用写真撮影のワークフロー～

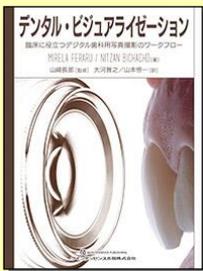

欧州をはじめ、世界的に著名な補綴・インプラント医の夫妻が著した歯科用デジタル写真撮影の解説書。口腔内写真、顔貌写真、修復治療での写真、矯正治療での写真、歯周治療での写真など、状況に応じた撮影テクニックが明快に示されている。審美性と規格性を両立する、歯科臨床写真の最新指南書。

- 著 =Mirela Feraru/Nizan Bichacho
- 監修=山崎 長郎
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=18,000 円+税

『鼻呼吸 歯医者さんの知りたいところがまるわかり』
～鼻と口の呼吸で何が違う?なぜ違う?～



鼻呼吸促進に長年尽力してきた内科医が、“お口ぼかん”による弊害や鼻呼吸推奨の根拠、鼻閉解消法、保健指導のヒントなど、あまり知られていない数々の“呼吸トリビア”を、コミカルなイラストを多用して平易に解説。患者への動機づけの活用はもとより、患者や医療者の健康を守るためにも見逃さない一冊。

- 著 =今井 一彰
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=4,500 円+税

別冊 歯科衛生士

『もっと使える超音波スケーラー』
～知りたかったポイントがよくわかる～



超音波スケーラーのエビデンスを吟味し、歯科衛生士が行う歯周基本治療、特にSRP(デブライドメント)における手技を大きな写真で解説。チップ・パワーの選択、当て方から機器のメンテナンスのポイントまで、超音波スケーリングに必須の情報を網羅した一冊。

- 著 =小牧 令二
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=3,800 円+税


『新インプラントオーバーデンチャーの基本と臨床』
～磁性アタッチメントを中心に～



インプラントオーバーデンチャー成功のための7つの勘所、各章または各項に設けられた重要ポイント、設計チャート、確認チェック表などを掲載。また、長期経過症例を含む120以上の代表症例を供覧し、義歯の設計、術式、注意点、実際の臨床に即したテクニックを網羅した一冊。

- 著 =田中 譲治
- 出版=医歯薬出版
- 価格=18,000 円+税

『ホームドクターによる
小学校2年生まで始める拡大床治療』

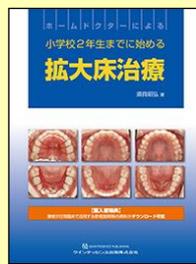

ライフワークとして子どもたちの咬合育成にかかわる著者による、拡大床治療の“道しるべ”となる一冊。一般開業医が導入できる、拡大床治療の適応症・設計・調整法などを1,000枚以上の写真や長期症例とともに解説。拡大床治療の開始時期を小学校2年生までと定め、臨床で必要になる患者説明やMFTの方法も実例で紹介。

- 著 =須貝 昭弘
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=15,000 円+税

『よくあるケースでイチからわかる！
開業医のための歯科訪問診療算定ガイド』
～依頼があっても困らない 保険の知識と請求例～



メインは診療室ではあるが、可能な範囲で訪問診療も手がけたいような歯科医師を主な対象に、義歯の調整や痛みの訴え等よくある事例のカルテをもとに歯科訪問診療の基本的な算定についてやさしく解説。カルテをベースに算定の実際がよくわかる！依頼時に役立つ医院必携の一冊。

- 編 =湯島保険診療研究会訪問部会
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=3,700 円+税

『診療前後の1分でできる！
歯科医師・歯科衛生士のための体のゆがみ
セルフコンディショニング』



歯科医療従事者の体の不調や悩みを熟知した歯科医院と連携する治療院の姿勢改善トレーナーが、簡単で効果的なセルフコンディショニング法を紹介。体の不調や疲れの“改善・予防”に効果的な即効ストレッチ&エクササイズが理解できる一冊。

- 監修=福岡 博史
- 著者=田口 直人
- 出版=ヒューロン・ナブリッシュヤーズ
- 価格=3,500 円+税

『くちペディア』



歯・口に関する患者さんの疑問や不安などにわかりやすくお答えし、患者さんの気づきを促し、モチベーションを高め、治療やメンテナンスにつながります。患者さんが知りたかった歯科医療情報満載の、読んで楽しく納得できる、充実したコラム。

- 編著=眞木 吉信/萩 名子
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,000 円+税