

UK UK REPORT

@New Products

プレジジョンUltra X /ヨシダ 〈歯科用根管洗浄器〉



ヨシダから発売された歯科用根管洗浄器“プレジジョンUltra X”は、超音波振動による根管洗浄を行うことで、スミア層を除去し、根管内の細菌を減らすことができるので良好な予後が期待できます。軽量かつコードレスなので操作が容易で、治療に合わせた3種類のチップにより、根管洗浄だけでなく、ガッタパーチャの除去、超音波の振動を用いた充填が可能です。

【特徴】

- シルバーチップは柔軟性が高く根管の形状に沿って洗浄が可能です。また、根管充填前に使用することでより緊密な根管充填が期待できます。
- ゴールドチップは根管洗浄だけでなく、破折ファイルやガッタパーチャ等の根管内異物除去にも使用できます。
- ブルーチップは形状記憶が可能なチップで、彎曲した根管内に挿入しやすく、効率よく洗浄できます。
- ハイモード（出力100%）とローモード（出力70%）の2段階出力モードの設定が可能です。
- 1,500mAhのリチウム電池を採用。フル充電で約4.5時間の使用が可能です。

標準価格＝本体一式 75,000円
 シルバーチップ#20×2本入 6,900円
 ゴールド、ブルーチップ
 (#20・#30各1本入) 各6,900円

ナクリア/ワシエスメディカル 〈環境除菌ワイプ〉



ワシエスメディカルより発売された“ナクリア”は、有機酸と金属イオンを主成分とした人にやさしい環境除菌ワイプです。動植物にとって必要な必須ミネラルで、細菌からウイルス・芽胞菌まで強力に除菌します。

【特徴】

- ナクリアは、金属イオンを有機酸水溶液に効果的に分散、参加させることで安定化させ、より安全に使用できます。この酸化された金属イオンをナノ粒子化させることで、ウイルス・細菌表面の接触面積を増やし除菌効果を高めます。
- アルコールフリーで肌荒れの心配もなく、薬品臭やベタつきもほとんどありません。
- 拭き取り面残留した有効成分により、乾いた後でも長期間抗菌性が持続します。
- 分子レベルの細菌はもちろん、臭いのもとを化学的に分解します。
- パウチタイプ（120枚入）と大容量のパケッタイプ（300枚入）・パケツ詰替（300枚入）をラインナップ。

標準価格＝パウチタイプ 700円
 パケッタイプ 3,400円
 パケツ詰替 2,300円

セラスマートコート/ジーシー 〈光重合型レジン表面滑沢 キャラクターライズ材〉



ジーシーから発売された“セラスマートコート”は、CAD/CAM冠をはじめ、保険診療の補綴装置にも口腔内外で使用可能な光重合型レジン表面滑沢キャラクターライズ材です。混ぜせずに単色で使えるシンプルなカラーをラインナップしました。

【特徴】

- 100nm以下のナノフィラーの縫合による優れたツヤ維持性と耐摩耗性を実現。長期的に審美性を維持し、また補綴装置の咬合面にも使用することが可能です。
- シンプルな4色（クリアコート、インテンスシホワイト、インサイザルグレー、サービカルブラウン）をラインナップ。
- 色を混ぜなくてもすぐに使える色調で、お好みに応じて重ね塗りができます。また、クリアコートを用い希釈により表現を調整できます。



標準価格＝スターターセット 13,490円
 単色 各3,390円

@My Recommendation

『ピュアメーカー』 〈日本歯科工業社〉



標準価格＝本体一式 11,700円
 (カートリッジ2個・カップ・チェッカー)

「水道水」から簡単・経済的に「精製水」を作る！

今回ご紹介させていただく商品は、日本歯科工業社より販売されております卓上型精製水器『ピュアメーカー』です。こちらの商品は、オートクレープ等に使用する精製水を水道水から簡単に作ることでできる卓上型の精製水器となりまして、特徴としては、①簡単⇒水道水を付属のカップに入れ（MAX1500ml）、カップから本体タンクに水を注ぎ、カップを本体にセットするだけで約4分で精製が完了。②経済的⇒独自開発したイオン交換樹脂カートリッジにより、純度の高い精製水を1つのカートリッジで約350ℓ作り出すことが出来るため1ℓ当たり約¥13と非常に経済的。③電源不要⇒電源が不要なので、置く場所を選ばず使用することが出来て、必要な時に必要な分だけ精製水を採水可能。また、小さくてスタイリッシュなデザイン。

ご購入いただいているお客様からは、「従来は20ℓの精製水を購入しており、場所は取っていたしコロナ禍による値上がりもあったが、ピュアメーカーによりどちらも改善されたので非常に良かった。」とお声を頂いております。詳しい詳細につきましては弊社営業担当者までお問い合わせください。

鹿児島店 営業三課 大山 奈織



@New Topics

★UK Boost 企画 トクヤマ CR 充填器のご案内!

当社営業マン厳選の“GDS” CR 充填器シリーズ!

当社オリジナル Boost 企画といたしまして、トクヤマデンタルから好評発売中の“トクヤマ CR 充填器”を 12 月 18 日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたします。当社営業マンセレクトによるオススメ製品で、製品説明用の動画もご用意いたしておりますので、この機会にご用命いただけますようお願いいたします。詳細につきましては営業担当者までお申し付けください。

【GDS フロアブルアート】

先端が球状のアプリケーターは窒化チタン (TiN) コーティングされており、レジン離れが良く、フロアブルレジンの細かい塗布やステインの塗布に適した充填器です。先端部が針状のアプリケーターはレジン充填時のキャラクターゼーションや更に細かい用途に使用できます。

【GDS スイングアート】

先端部にダイヤモンドライクカーボン (DLC) コーティング加工が施してあり、表面がとても滑らかで、表面硬度、耐摩耗性、表面滑沢性に優れた充填器です。先端部はマルク、厚さ 0.12~0.15 と薄く、隣接面や歯肉縁下に容易に挿入することができ、先端のカーブが歯面の形態にフィットし、隣接部の充填や歯冠部の形態修正がスムーズに行えます。

【GDS ポステリア】

先端部にダイヤモンドライクカーボン (DLC) コーティング加工が施してあり、表面がとても滑らかで、表面硬度、耐摩耗性、表面滑沢性に優れた充填器です。先端に 2 種類の形態を持ち、コンポジットレジンの充填、小窩裂溝の形成がスムーズに行えます。


UK #1 キャンペーン期間 2020.10.21 - 2020.11.18
 BOOST キャンペーン最終日! 12月18日午前10時まで
 大好評により期間延長 12月18日午前10時まで
 歯科用充填器 トクヤマ CR 充填器
 GDS フロアブルアート
 GDS スイングアート・ポステリア
 UK DENTAL

標準価格

- ・GDS フロアブルアート 4,700 円
- ・GDS スイングアート 6,000 円
- ・GDS ポステリア 6,000 円


@New Books & Video

★今週の新刊 『開業歯科医のための小外科手術 Check Point』

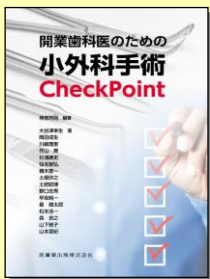

第一線の執筆陣により、外科の基本から具体的な手術内容まで、日常臨床で必要となる小外科手術のテーマを豊富な写真を用いて解説。また、最新の考え方を踏まえ、小外科をブラッシュアップできる一冊。

- 編著=神部 芳則
- 出版=医歯薬出版
- 価格=9,000 円+税

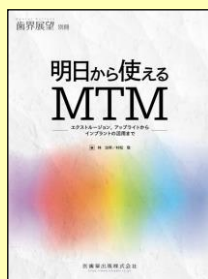

月刊「歯界展望」別冊 『明日から使える MTM』
 ~エクストレーション、アップライトからインプラントの活用まで~

MTM の基本となる技術から、ハイレベルな矯正治療を見据えた技術まで、7 つの実習と 57 の症例でわかりやすく解説。歯牙移動、歯牙移植による生体の組織学的変化を基礎実験より検証し、MTM の本質への理解を深める情報も収録した一冊。

- 編 = 林 治幸 / 村松 敬
- 出版=医歯薬出版
- 価格=6,300 円+税

『世界標準のインプラントメンテナンス』
 ~実装したい知識・手技・教育のすべて~



インプラントメンテナンスにかかわる世界と日本の最新情報を整理し、標準化した医療を提供するための一助として企画された書。多くの施設で実践するうえで欠かせない教育システムも重視し、看護師の教育に用いられる「クリニカルラダー」も盛り込んだ一冊。

- 編著=柏井 伸子
- 著 = 入江 悦子 / 篠原 こそえ
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=6,000 円+税



『最強の歯科ミーティングバイブル』
 ~院長の不安解消、スタッフのモチベーション向上~

年間講演数 100 回を誇り、SNS でも話題の著者の人気セミナーを書籍化。著者が編み出し 5 つのワークを院内ミーティングで実践することにより、スタッフの個性を伸ばしたり、チームの結束力が強化されるなど、組織の活性化につながります。歯科医院のチーム力を高めるステップアップワーク集。

- 著 = 角 祥太郎
- 出版=デンタルダイヤモンド社
- 価格=4,800 円+税