

UK UK REPORT

@New Products

ルート ZX3/モリタ ＜歯科用根管長測定器＞



モリタから発売された“ルート ZX3”は、根管長測定器に運動可能なポータブル高周波治療器を追加可能な根管長測定器です。基本機能である根管長測定機能は徹底的な見やすさと使いやすさ、そして精度を追求し、より快適なエンド治療の実現が可能です。

【特徴】

- ネガ液晶と大画面による高い視認性を実現。また、スピーカーによるクリアな音質と音量を向上。
- オートキャリブレーション機能の搭載により、測定値の誤差を自動で補正し、安定した測定精度を保ちます。ドライモウェットでも根管内の状態に影響されない高精度な測定が可能です。
- 高周波モジュールにより、根管内に高周波電流を発生させ、根管内の歯髄、汚染物質（細菌）などを焼灼することが可能です。
- 専用アプリでiPadとBluetooth接続することで、より大画面での操作が可能です。

標準価格＝

根管長測定モジュール	110,000 円
高周波モジュール	239,000 円

ブリリアントモアW /ライオン歯科材 ＜美白歯磨剤＞



ライオン歯科材からリニューアル発売された“ブリリアントモアダブル”は、ライオン歯科材初のピロリン酸ナトリウムとポリリン酸ナトリウムのダブル成分を配合し、浮き上がったステインをすっきり落とします。さらに口臭予防機能を追加し、美白ケアに有効です。

【特徴】

- 清掃助剤ピロリン酸ナトリウムとポリリン酸ナトリウムのダブル成分が、ステインを歯の表面から浮き上げらせ、ブラッシングですっきり落とします。
- LSS（ラウロイルサルコシナトリウム）が、口臭原因菌を殺菌し、口臭の発生を防ぎます。
- フッ化ナトリウム配合で、歯の石灰化を促進。う蝕の発生・進行を予防し、健康な歯を保ちます。
- フレッシュスペアミントはナチュラルペパーミントに香味が変わりました。

患者参考価格＝

1本（90g 入）	1,045 円（税込）
-----------	-------------

スピーデックス/ヨシダ ＜シリコーン印象材＞



ヨシダから発売された“スピーデックス”は、ポリシロキサンを主成分とした手練りタイプの縮重合型シリコーン印象材です。優れた親水性により、口腔内の滲出液に影響されにくい、細部までシリコーン印象材が行き渡ることで、より精密な印象採得が可能です。

【特徴】

- 優れた寸法安定性のため、印象採得後7日以内であれば印象面に悪影響を与えることなく石膏を注ぐことができます。
- アクチベーターの量を増減することで、印象採得ケースに応じて操作時間の調整ができます。また、アクチベーターはスピーデックスシリーズ全てに共通するため、1つのアクチベーターで全てのスピーデックスに使用でき経済的です。
- スピーデックスは、「スナップ」セット（急硬化）により、常に初期硬化の段階から寸法安定性が得られます。
- 硬化時による止血剤や麻酔、ラテックスグローブの影響を受けません。

標準価格＝

ライトボディ 140ml	7,420 円
ミディアム 140ml	7,420 円
パテソフト 910ml	14,560 円
ソフト 910ml	14,560 円
アクチベーター60ml	6,180 円

@My Recommendation

『ヴェリコム Well-Pulp ST』 ＜ペントロンジャパン＞



標準価格＝2g シリンジ入 11,800 円

次世代の材料！練和不要の水硬性バイオセラミックペースト！

今回、ペントロンジャパン様より発売されております『ヴェリコム Well-Pulp ST』をご紹介します。ヴェリコム Well-pulp ST は充填後、組織液（体液）中のリン酸イオンとの反応により、材料表面上にリン酸カルシウムを形成します。そのため、歯質と材料との隙間で経時的にハイドロキシアパタイトを形成し、歯質との封鎖性を促進します。バイオセラミックマテリアルはケイ酸カルシウムを主成分とした流動性に富んだ材料で、硬化後の膨張により封鎖性に優れています。MTA セメントと組成が類似していますが、それ以上に高純度に精製された原材料を厳選して使用し、アレルギー・細胞への毒性などが懸念される有害な重金属を含有していません。


ご使用いただいている先生からは、「ペーストタイプだから充填にかかる時間も短時間で済み、造影性も良好。歯質を変色させる物質が含まれていないから審美的にも良い。」とお声をいただいております。詳細につきましては弊社営業担当者へお尋ねください。

熊本店 営業二課 生駒 和敬

◎New Books & Video

★今週の新材

『天然歯にこだわるGPの総合歯科臨床』
～矯正・エンド・ペリオ・インプラントの治療戦略～

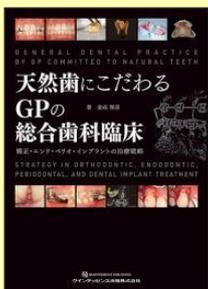

GPの目線から、多種多様な問題を抱えた患者に対応する手法が紹介された書。とくに矯正治療を活用した口腔機能の回復・維持を図る症例が豊富だが、エンド・ペリオ・インプラント、再生療法等、あらゆる方策を用いて患者の口腔環境を総合的に整えていくケースを多数見ることが出来る一冊。

- 著 = 金成 雅彦
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=18,000 円+税


『鈴木哲也のよい義歯だめな義歯2』
～咬合採得と咬合調整で失敗しないためのコンプリートデンチャー4ステップ12ルール～



名著『よい義歯だめな義歯』の続編である本書のテーマは咬合。「義歯製作の理論、術式はさまざまでもあるべき義歯の姿はひとつ」という前書の考えを踏襲し、総義歯における咬合のさまざまな事項を論理的に整理し、「よい義歯」を目指す道筋をシンプルな方法論として解説した一冊。

- 著 = 鈴木 哲也/古屋 純一
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=11,000 円+税

『歯科医療従事者のための感染制御入門』

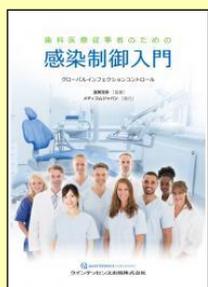

新型コロナによる生活様式の激変から、歯科医療においても例外でなく、患者やスタッフに配慮したさまざまな感染対策が講じられ、感染制御について改めて考え直す機会となった。本書は、歯科診療所における感染制御の基本を知り、正しい知識を習得できるための「最初の一冊」として、写真やイラストを多用し詳説した書。

- 監著=渥美 克幸
- 協力=メディコムジャパン
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,600 円+税


別冊 ザ・クインテッセンス
『一般臨床家、口腔外科医のための口腔外科ハンドマニュアル '21』



巻頭特集では、新型コロナウイルス感染症に関する現時点の見解を提示し、現場で役立つ基本的な情報や対応等をわかりやすく解説。また、ベーシック編、アドバンス編、口腔と全身の管理編の3つのセクションで、臨床に活かす知識や技能を提供し、現場臨床に役立つ最新情報満載の一冊。

- 編 = 日本口腔外科学会
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,400 円+税

『マイクロスコープを使いこなすためのミラーテクニックAtoZ』
～Web 動画付～

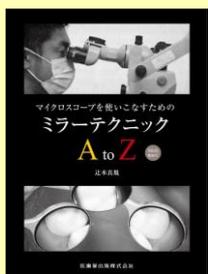

マイクロを活用するために必須のミラーテクニックについて、「ミラーの種類」「動かし方」「スクーリング・SRP」「エンド」など、動画と写真でわかりやすく具体的に解説。「マイクロを使うときにどうも見にくい」「マイクロを使い始めたが、なかなかミラービューがうまくならない」など、マイクロスコープ初学者が抱きがち悩みを解決する一冊。

- 著 = 辻本 真規
- 出版=医歯薬出版
- 価格=7,200 円+税

『動画で体感！ステップアップ歯周外科2』
～部位別編～



ロングセラー『動画で体感！ステップアップ歯周外科 診断・手順・テクニック』の第2弾となる続編。歯周外科治療の選択基準を“ペリオドンタルサージカルツリー”として提示し、それを基に各部位別の歯周外科の治療戦略と術式を実践的に解説。計70分を超える動画(22本)が付属しており、実際の歯周外科処置がビジュアルに学べる一冊。

- 著 = 安東 俊夫
- 出版=医歯薬出版
- 価格=10,000 円+税

『歯科衛生士のための地域ケア会議必携マニュアル 第2版』



「地域包括ケアシステム」や「地域ケア会議」の目的とその効果について具体的に知ることができ、地域ケア会議に出席する際の心構えと資料の読み解き方、会議での助言内容などのスキルアップをはかるために役立つ一冊。

- 監修=公益社団法人日本歯科衛生士会
- 編集=秋野 憲一
- 編 = 武井 典子/久保山裕子/山口 朱見
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,200 円+税

『事例から実践を学ぶ 歯科医院の成長戦略バイブル』



本書は、①自院の置かれているポジションや今後のステップを理解でき、②それらに必要な施策をインプットし、③明日からのアクションにつなげる、ことを目的に「羅針盤・地図」として活用できる書。いまず始めるグレートクリニックになるための羅針盤。

- 編 = 船井総合研究所
- 出版=医歯薬出版
- 価格=4,000 円+税