

UK

UK REPORT

New Products

バキュームミラー
／プレミアムプラスジャパン
〈吸引型ミラー〉

プレミアムプラスジャパンから発売された“バキュームミラー”は、お使いのバキュームに接続することで、ミラーのヘッド部から吸引することが可能なバキュームミラーです。前後左右上下にある計22のバキューム孔が、どのような角度でも吸引残しを許さず、且つ舌や粘膜を吸い込むことがありません。

【特徴】

- 反射率 99%の表面反射ミラーにより、ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較して40%明るいミラーです。また、防曇加工により、ミラーの曇りを軽減します。
- 常に吸い続けることができるので、ミラーで圧排しながら防湿も同時に行えます。特に補綴のセット時に有効です。
- タービンやミラー、バキュームが入りづらい狭い口腔内に
- 別売の 360° 回転アダプター付き軽量チューブでミラー操作を妨げません。
- バキュームミラーは、ブルー、イエロー、グリーンの3本カラーアソートセット。

標準価格＝ミラー（3本入） 15,000円
バキュームチューブ 18,000円
変換アダプター 900円

キャピトン ファスト／ジーシー
〈水硬性仮封材〉

ジーシーから発売された“キャピトンファスト”は、根管治療時の仮封や形成窩洞保護を、より早く、より短く、そして操作がさらに向上した水硬性仮封材です。

【特徴】

- 硫酸カルシウム（石こう）を微細粒子化することで、初期硬化のスピードがアップ。これにより、早期に良好な辺縁封鎖性が期待できます。
- 充填後30分で咬合が可能です。従来品の1時間の半分で硬化するため、患者さんの負担を軽減します。また、仮封材の剥離によるリスクも低減します。
- ジーシーが独自開発したガラスフィラー「BioUnion ガラス」を配合。インスツルメントやグループにも粘着しにくく、歯質へはしっかりと密着します。
- ベタつきを抑えた適度なかさで充填がしやすい仮封材です。
- 新容器を採用。フタと一体化した容器で、密封性が高く、中身を湿気から守ります。また、フタはツバ付きで開閉しやすいデザインで、使いやすさにも配慮しています。
- ホワイト、ピンク、アイボリーの3色をラインナップ。

標準価格＝1個（30g入） 1,060円

カーラプリント 4.0 プロ
／クルツァージャパン
〈歯科用 3D プリンター〉

クルツァージャパンから発売された“カーラプリント 4.0 プロ”は、クルツァー社が開発した歯科専用のインテリジェント 3D プリンターです。3D プリント技術の「デジタルライトプロジェクション」により、一定の速度で積層するのではなく、投影シーケンスと機械の動きを常に計算し造形速度を適切に変化差させることで、高精度な造形物の高速積層を実現します。

【特徴】

- 従来品「カーラプリント 4.0」と比較してプラットフォームを50%拡大。造形できる面積が増えました。
- プリンター表示画面に従って操作するだけなので、初めて操作する方でも簡単に使用することができます。
- 3D プリント面積は、W124×D70×H130mm。
- 右記のQRコードから製品の紹介動画が閲覧可能です。



標準価格＝本体一式 1,980,000円

My Recommendation

『タービンジェット』
〈ピヤス〉

標準価格＝タービンジェット 10,000円
メンテナンス専用オイルPスプレー5,500円

タービン故障リスクの軽減に！

今回ご紹介させて頂く商品は、ピヤス様から発売されているチャック内清掃ノズル『タービンジェット』です。タービンのチャックが緩む原因といたしまして、チャック内部ホールドポイントへの注油不足、切削物等の汚れ詰まりなどがあります。（チャック内清掃不足）チャック内部にしっかりと注油が為されていないと、汚れが溜まり保持力の低下はもちろんチャック本来の寿命も短くなり、その結果カートリッジ交換を余儀なくされます。タービンジェットは専用のオイルスプレー缶を使用し、ステンレス製のノズルがチャック内部の正確な位置で四方八方へ噴出されるよう設計されており、ホールドポイントの汚れの除去および金属摩耗の予防ができるため、タービンのカートリッジの長持ちに繋がります。

現在お使いの医院様からは、「通常のタービンメンテナンスにひと手間加えただけで、チャック不良で修理に出す頻度は確実に少なくなった。」とお声を頂いております。タービンの故障等が多発してお困りの医院様御座いましたら、是非一度ご検討いただければと思います。なお、コントラ用としても同等商品がラインナップされております。詳細につきましては、弊社営業担当までお問合せください。

鹿児島店 営業二課 当房 洋介



@New Books & Video

★今週の新刊

『あなたの根管治療はここがちがっている！』
～失敗の原因、成功のポイントはなんだったのか？～



他医院で治療を失敗した患者の再根管治療を多く手がける著者が、その失敗の原因、リカバリー成功のポイントはなんだったのかを解き明かす！実践臨床例やイラストなどを提示して「なぜ根管治療が失敗したのか？」「どうすれば根管治療を成功させられるのか？」の視点から、新技術で変革を成し遂げている根管治療を分析・解説した一冊。

- 著 = 鶴町 保
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=8,000 円+税


『DHとDRのための歯周ポケット鑑別ガイド』
～その病変は本当にペリオ？～



その病変（ポケット）は本当にペリオ？深いポケットの原因がわからず迷うときに疑ってほしい4つの病変をビジュアルに解説。歯周治療のこだわりの歯科衛生士・歯科医師のための歯周ポケットガイドブック。

- 編著=森田 久美子
- 著 = 下野 正基/平井 友成/大川 敏生
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,000 円+税


別冊Z・クインテッセンス
『YEARBOOK2022 臨床に生かす！』
GPによる限局矯正 [LOT]
～挺出、アップライト、圧下、叢生改善から多数歯 LOT まで～

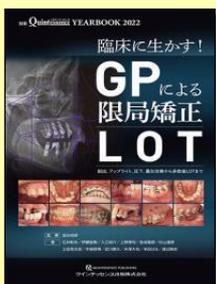

一般臨床家（GP）自身が LOT（限局矯正）を行うメリットについて、斯界の気鋭歯科医師が症例を通じて解説。ワイヤーや矯正用アンカースクリュー、インプラントを用いた圧下、傾斜歯のアップライト、挺出といった少数歯の LOT から、病的歯牙移動（PTM）に対する多数歯の LOT まで学べる一冊。

- 監著=加治 初彦
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,400 円+税

『Dr.弘岡に訊く臨床的ペリオ講座』
スキャンジナビアンアプローチの実践』

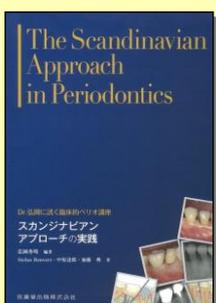

ロングセラー書「Dr.弘岡に訊く臨床的ペリオ講座」が、最新文献を交えてリニューアル！各章に設けられた「症例解説」では実際の手技や症例の長期経過を詳説。1つの疑問に対し、関連するエビデンスで答えるというシンプルな形式で、必ず押さえておきたい歯周治療の根拠を明確に学べる一冊。

- 編著=弘岡 秀明
- 著 = Stefan Renvert/中原達郎/加藤 典
- 出版=医歯薬出版
- 価格=15,000 円+税

『メンテナンスが増える 患者説明 超入門』
～そのまま使える！スタッフ教材+患者説明用カード13～



豊富な図解と短い文章で要点がわかりやすく短時間で読める患者説明入門書が誕生。隙間時間を使った時短学習が可能で、そして巻末付録のカードで即実践！カードを繰り返し使ううちに、説得力のある患者説明が身につく一冊。

- 著=伊藤 中/植野正之/景山正登/加藤正治
北迫勇一/五味一博/須崎 明/土屋賢司
花田信弘/平野正徳/福島正義/山崎要一
山崎てるみ/山本 寛
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,900 円+税

『やってみなはれ』
～粹で雅な歯科人生語録～



今、歯科界のインフルエンサーと言えば、この2人“中田光太郎”と“瀧野裕行”のゴールデンコンビがタッグを組み、「歯科人生語録」をまとめた書。何事もまずは「やってみなはれ」の信念で取り組む生粋の京都人2人が、臨床だけでなく医院マネージメントさえも成功させている秘密が明らかになる一冊。

- 著 = 中田 光太郎/瀧野 裕行
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=2,700 円+税

『臨床に活かせるコンポジットレジン修復』
～レベルアップに必要なテクニックと勘所～



充填手技における知識やインストルメントを用いた CR の有効な扱い方など、臨床目線からわかりやすく解説。要点を押さえてトレーニングを積み、特別のスキルを必要とせず、誰もが一定のレベルに到達できるようにまとめた、明日から使える臨床的に知識とテクニック、メソッドを凝縮した一冊。

- 著 = 飯田 真也
- 出版=医歯薬出版
- 価格=6,000 円+税

月刊「歯科技工」別冊
『補綴装置製作のための歯科材料学 UPDATE』



本書では、従来法および CAD/CAM 法で製作される補綴装置の「金属系」「高分子系」「セラミックス系」材料の“今”と“これから”を、「基礎」と「臨床」の両面から、着実な臨床応用を目的とした視点でわかりやすく解説。材料の特性に基づく補綴装置製作に不可欠な事項を臨床応用ありきで整理した一冊。

- 著 = 末瀬 一彦/宮崎 隆
木原 琢也
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,900 円+税