

UK

UK REPORT

New Products

アクアセップ/松風
＜口腔内用水溶性分離材＞

松風から4月21日に発売される“アクアセップ”は、口腔内で使用可能な水溶性の分離材です。視認性の高い紫色の液体で、塗布面の見分けが付きやすく、水洗で被膜を除去することができます。裏層用コンポジットレジンやレジン系仮封材と歯質の分離など、さまざまなシーンで活用できます。

【特徴】

- 主成分に歯磨剤などに使用されている水溶性ポリマーとエタノールを用いているため、口腔内で使用が可能です。
- 必要量だけを塗布可能な適度な粘度のある液体なので、後垂れもありません。塗布後にエア乾燥すると、エタノール成分が揮発し、水溶性の被膜が形成されます。
- 高い分離効果が得られ、塗り重ねて被膜を厚くして、分離効果を向上させることもでき、その被膜厚さを色調の濃淡で判断が可能です。
- 水溶性成分の採用で、使用後は水洗で被膜を除去できるので、その後の接着阻害が起きにくくなります。油性のワセリンやココアバターより除去しやすく、チェックタイムの短縮が可能です。

標準価格＝1箱（10ml入） 1,800円

ROTATE NiTi ファイル
/松風
＜電動式歯科用NiTiファイル＞

松風から4月21日に発売される“ROTATE NiTi ファイル”は、シンプルな操作ステップでさまざまな症例に対応可能な電動式歯科用NiTiファイルです。特殊な熱処理により高い柔軟性と耐久性を有するため、天然歯の根管構造を追従し、ファイルの破折リスクも軽減されます。

【特徴】

- 3ファイルの基本術式で単純な症例から複雑な症例まで、根管形成を効率的に行うことができます。シングルレンクス法により同じ作業長で徐々に拡大するため、深さの調整が不要です。
- 独特のS字型断面が安全かつ迅速な形成をサポートします。
- ブラッシングモーションにより、ファイルは無理なく根尖方向に進行し、根尖方向と側方の同時形成が可能です。刃全体を使って切削するため、レジヤアピカルパーフォレーションなどのリスクが低減します。
- ファイル長は21mm、25mm、31mmの3種、テーパーは04、06の2種類、05テーパーは#20とリトリートメント用ファイルのみ。

標準価格＝3本アソートセット 5,600円
単品4本入 7,500円

ガム・ウェルプラス デンタル
ブラシ#226/サンスター
＜指導用歯ブラシ＞

サンスターから発売された“ガム・ウェルプラスデンタルブラシ#226”は、歯肉炎～初期歯周炎の方に適した指導用歯ブラシです。極細毛先が、屈みにくい狭い隙間のプラークを除去。歯頸部や歯間部などの狭い部位に磨き残しがある方に最適です。

【特徴】

- 超先細よりも毛先が細い極細加工で、歯頸部や歯間部の狭い隙間により届きやすくなりました。
- サテナイズド加工された毛先が、歯周プラークをしっかりとからめとります。
- ペンクリップが自然にできる多角形ハンドルを採用。
- ロングネックのストレートハンドルなので、臼歯部に届きやすく、歯面にまっすぐ毛先を当てやすい。
- 院内指導で開封しやすい包装仕様。
- キャップ付きでTB1後、患者さんが衛生的にお持ち帰りいただけます。
- 毛の硬さは、M（ふつ）とS（やわらかめ）の2種類。
- ハンドルカラーはピンク40本、ブルー30本、クリア30本の3色（計100本入）。

患者参考価格＝オープン価格

My Recommendation

『ラポライト DUO』
＜ジーシー＞

標準価格＝本体一式 260,000円

二つの作業を1台で！

今回ご紹介させていただく商品は、(株)ジーシーより発売されております歯科技工用重合装置『ジーシーラポライト DUO』です。こちらの商品の特徴は、①本重合と仮重合がこれ1台で出来る。②幅 159mm×奥行 290mm×高さ 297mm 重量 5.9kg とスリムでコンパクトなので設置場所を選びません。③上方に開口するので技工物の出し入れが容易。④波長域の違う2つの LED を使用しているため光重合レジンから表面滑沢材まで幅広く硬化します。また3方向から照射するのでアンダーカットまでしっかりと光が届きます。⑤光源がLEDのため定期的なランプ交換の必要がほとんどありません。


現在ご使用中のご意見をお聞きしたところ、「以前は仮重合器と本重合器を並べて設置していたがラポライト DUO は1台で設置スペースが少なく済む。その為作業スペースが広く取れるので良かった。また従来のハロゲンからLEDに変わったことで重合時間も早くなり時短に繋がった。」とご意見を頂きました。実際に製品をご覧いただきたい場合は、デモ器もご準備できますので、弊社営業担当者までお申し付け下さい。

久留米店 営業一課 野口 義治

New Books & Video

★今週の新刊

『 RESTORATIVE DESIGN & PRACTICAL OCCLUSION 補綴設計 & 設計集 』

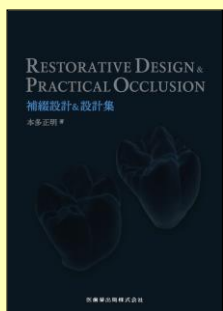

包括的治療の長期症例を検証することで導いた Longevity 達成のカギを余すところなく解説。咬合安定にとって最も重要な咬頭嵌合位の安定、歯列弓の保全、それを実現するために欠損歯列の診断と欠損補綴の設計が本書により体感できる。臨床家待望の書となる、本多正明先生の集大成シリーズ第 1 弾！臨床の真髄がここに！

- 編 = 本多 正明
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 30,000 円 + 税

『 歯科診療・口腔ケアにおける 救急 & アクシデント対応ハンドブック 』



安全な歯科診療・口腔ケアを行うための体制作り、高齢者の全身状態の把握を二つの核として解説。診療の体制作り、救急処置、全身状態の把握、救急来院時の対処法、アクシデント・偶発症対応法を、さらには医科などへの紹介のコツまで記載した一冊。

- 監修 = 森 悦秀
- 編集 = 山田 朋弘 / 大山 順子 / 熊丸 涉 杉山 悟郎 / 矢内 雄太 / 石井広太郎
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 6,500 円 + 税

『 小児在宅歯科医療の手引き 』



本書では、小児在宅歯科医療の必要性から、小児在宅歯科医療の期待・展望、小児在宅歯科医療を実施するための基礎的知識、診療体制など、事例（架空症例）を交えて解説。小児在宅歯科医療に関しての手引き書。

- 編 = 日本障害者歯科学会 ・診療ガイドライン作成委員会
- 出版 = 医歯薬出版
- 価格 = 3,000 円 + 税

『 写真でマスターするリライニング適材適所 』
～新義歯から痛い・外れる・割れた義歯まで～



本書では、新義歯作製時、あるいは義歯修復時に効果的なリライニングを行うためのポイントを大きな画像で解説。「痛くて食べられない」「義歯が割れた」など、患者さんの不満を短時間で確実に解消するために、リライニングを適材適所で活用するノウハウ満載の一冊。

- 著 = 村岡 秀明
- 出版 = ヒョーロン・パブリッシャーズ
- 価格 = 6,500 円 + 税

Seminar & Fair Information

◆◆◆お詫びと訂正◆◆◆

先週発行のUKレポート Vol.905 号 4 月度セミナー&フェア情報に掲載いたしました『 Keynote study club Keynote シェーマ、アニメーションコース 1 日コース 』の受講料に誤りがございました。関係者の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させていただきます。

開催地	Keynote study club Keynote シェーマ、アニメーションコース 1 日コース	2022 年 4 月 29 日(金/祝) ※満員御礼 7 月 10 日(日) ※時間：各回 11:00~17:00
福岡	<ul style="list-style-type: none"> ●講師：中島 寛明 先生 (福岡県開業：久留米セントラル歯科院長) ●主催：エイトピース <p>患者さんや歯科医療従事者へプレゼンする機会が多いのではないのでしょうか？今回、プレゼン等でも秀逸な多くのシェーマを描かれていた中島先生の 1 日コースを企画しています。第 1 回目は満員となりましたので、希望される方は 2 回目の応募をお願いします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●会場：はち歯科医院 セミナー室（福岡県大野城市） ●定員：9 名様 ●受講料：82,500 円（昼食費・資料・消費税込） ※お振込先はお申込み後にご連絡いたします。 ●対象：プレゼンテーションソフト Keynote ユーザーの歯科医療従事者様 ●問合せ：第 2 回希望の方は QR コードよりお申込みください。 E-Mail : ksc.dental2022@gmail.com ※メールにてお申込みの際は「受講希望」とメッセージをください。 <p style="text-align: right;">お申込 QR コード</p>