

UK UK REPORT

@New Products

スクリューポストリムーバー /デントレード 〈スクリューポスト除去システム〉



デントレードから発売された“スクリューポストリムーバー”は、先端のチャックがスクリューポストを確実に把持し、除去することができるリムーバーです。頭部のローレットを左回転（逆ネジ）することでチャックが締め、さらに左回転することでスクリューポストが除去できます。

【特徴】

- スクリューポスト把持部のチャックは径寸法が異なる2種類を用意。さまざまな大きさのスクリューポストに対応します。
- 頭部のローレットが左回転（逆ネジ）になっていることで、対象のスクリューポストを確実に把持すると同時に、スクリューポストを回転させ、除去することができます。
- 本体・ローレットはステンレス製、2種類のチャックは真鍮製を採用。オートクレーブによる蒸気滅菌が可能です。



標準価格=本体一式 10,000円

セラベース/モリムラ 〈MTA系自己接着性裏層材〉



モリムラから発売された“セラベース”は、BISCO社の「THERA」ファミリー共通の特徴である「THERA」テクノロジーを使用し、BISCO社独自の親水性レジンマトリックス、親水性モノマー、MDPモノマー、ポルトランドセメント、フッ化ナトリウム、生体親和性、カルシウムイオン&フッ化物イオン徐放性、象牙質に高い接着強度、アルカリ性 pH、高い曲げ強度、高い圧縮強度を実現したMTA系デュアルキュア型接着性裏層材（ベース&ライナー）です。

【特徴】

- MDPモノマーを配合しているため、象牙質に化学的に接着し、強い接着強度（12.75MPa）を実現します。適用後、数分で酸性からアルカリ性 pH に移行（重合後には pH10 に到達）するため、酸産生菌が生育しにくい環境を作ります。
- 象牙質（圧縮強度：230~320MPa）に近似した物理特性のため、裏層材（象牙質代替材料）に適しています。
- 自動練和タイプなので、粉・水等の計測や手練和が不要で、必要量だけを直接適用することができます。

標準価格=1本（8g入） 15,000円

プログラマット G2 シリーズ /イボクラールピバデント 〈セラミックプレスファーンレス〉



イボクラールピバデントから発売された“プログラマット G2 シリーズ”は、洗練されたデザイン、優れた操作性、高機能を実現し、審美性の再現や様々なニーズに対応したプレスファーンレスです。FRF（全自動プレス機能）の搭載により、今やプレス工程はより簡単、経済的なプレスセラミックスの製作方法へ進化。インベストメントリングをファーンレスにセットし、スタートボタンを押すだけで適したプログラムでプレスを行います。


【特徴】

- プログラマット EP5010G2 は、赤外線カメラ（IRT）機能を搭載し、赤外線カメラから得られる情報を元に、炉内にある修復物の数やサイズ、適切な乾燥状態をファーンレスが把握し、混相公営のパラメータを自動で調整します。
- 埋没リングのクラック検地システム（CDS）機能を搭載し、必要に応じて圧力を調整し、可能な限り修復物の破損を抑えます。
- オートマチックキャリブレーション機構により、自動的に炉内の2つの温度域を正確にキャリブレーションし、正確な温度でプレスと焼成ができます。

標準価格=EP5010G2 2,290,000円
EP3010G2 1,730,000円

@My Recommendation

『プレパレーション用ラウンドチゼル』 〈マイクロテック〉

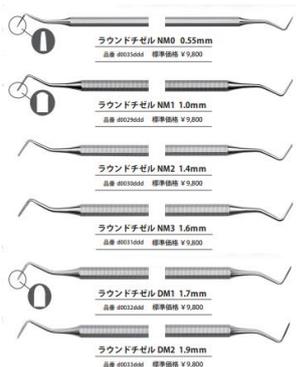

標準価格=各種 1本 9,800円

美しいマージン形成に!

今回ご紹介させていただきます商品は、(株)マイクロテックより発売されております『プレパレーション用ラウンドチゼル』です。

拡大鏡下、顕微鏡下における支歯形成後のマージン調整・仕上げ用のチゼルです。自費による補綴はもちろんCAD/CAMによる補綴が増えてきている昨今、シビアなマージン形成や厚みを確保したショルダー形成を行う事が求められるようになりました。そこでターピン形成後、最終調整を行い厚みの確認をする事も出来るインストゥルメントがこちらの商品になります。

ご使用いただいております先生からは、「ジャンピングマージンやラフマージンを軽く調整してあげるだけでマージンラインが滑らかになり補綴物装着後の美しさが違ってきます。」とおっしゃられます。幅の異なる6種類の商品があり、微妙に形態も異なりますので、商品の詳細につきましては弊社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

大分店 営業課 添田 義治

@New Topics

★UK 特別企画 伊藤超短波線 “D-function” のご案内！

国内初の歯科用両側性筋電気刺激装置！

当社は、伊藤超短波線とのタイアップ企画といたしまして、国内初の歯科用両側性筋電気刺激装置『D-function』を4月21日～6月20日迄の期間中、特別キャンペーンを実施いたしております。D-functionは、ファンクショナルな波形による電気刺激を与えることで、顎関節や咬筋など頭頸部の疼痛緩和や筋肉の弛緩が可能な電気刺激装置です。通電した際の皮膚への刺激が少ないので、患者様が快適にご使用いただけます。是非ともこの機会にご用命のほどお願い申し上げます。キャンペーン中の特別価格など詳細につきましては当社営業担当者までお気軽にお尋ねください。

【D-functionの特徴】

- 場所を選ばないコンパクトサイズでありながら、治療用グローブをしたままでも押しやすい大きなタッチパネルを搭載。
- デフォルトの出力は30mAで安全性にも配慮。
- CH1とCH2でそれぞれ個別の設定が可能で、多彩な5つのモードにより症状に合わせた治療が行えます。
- 患者様の肌に直接触れるD-functionパッドは、衛生的なディスプレイタイプを採用。
- 歯科診療報酬保険点数の請求が可能です。

標準価格＝本体一式180,000円 **今だけ！キャンペーン中！！**
 ※治療に使用するD-functionパッド(8枚入×10袋)をご提供！



製品紹介動画をご覧下さい！

D-function デイ・ファンクション

歯科用両側性筋電気刺激装置

D-functionは、国内初の歯科用両側性筋電気刺激装置です。電気刺激により、顎関節や咬筋など頭頸部の疼痛緩和や筋弛緩が可能です。毎日の日々の診療にお役立てできる治療と考え、ご案内させていただきます。

- 1 歯科診療報酬 保険点数の請求が可能！**
●顎関節など頭頸部の疼痛緩和の緩和、及び筋力の弛緩を目的とします。
- 2 顎関節の痛み以外の治療にも最適なプログラム！**
●マイルドな刺激により、電気刺激の苦手な方や、痛みが長く続いている方にも安心して治療ができます。
●30秒のトレーニングプログラムにより、簡単な操作で幅広い治療に応用可能。
●閉口(筋)のトレーニングを目的とした使用も可能です。
- 3 お求めやすい価格！**

保険適用可 (医H 002) 85点

本体 180,000円(税別)


今だけ！キャンペーン中！！
2022年6月20日納入分まで
治療に使用する消耗品「D-functionパッド(8枚×10袋)」を今だけご提供いたします。詳しくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

@New Books & Video

★今週の新刊

『最強の歯科ミーティングバイブル2』

～その悩みは診療か、診療以外か～

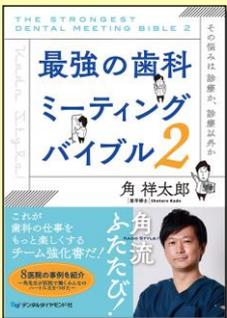

歯科医院の仕事を「診療」と「診療以外」に分類し、「診療以外」がうまく回り出すアプローチ方法を指南。加えて、スタッフの能力を引き出して院長が診療と経営に集中できるチームづくりのコツや、モチベーションを高めながら医院の改善を図るワークについて、愛らしいイラストでわかりやすく解説。組織の活性化を図りたい院長必読の一作。

- 著 二角 祥太郎
- 出版＝デンタルダイヤモンド社
- 価格＝5,000円＋税

『なぜ自費率50%の歯科医院をめざすのか』



『月刊デンタルダイヤモンド』連載「With コロナ時代の自費率50%を目指す歯科医院経営」が特長の書籍化。自費率50%を実現するために著者が築き上げたノウハウを惜しげもなく披露。医院コンセプトの設計から治療戦略の考え方、設備投資における選択基準、法人化を含めた事業計画まで、歯科医院経営のモチベーションアップとなる珠玉の一作。

- 著 丸尾 勝一郎
- 出版＝デンタルダイヤモンド社
- 価格＝6,300円＋税

The Rule Book①

『成功に導くための基準とステップがわかる 前歯部審美治療のルール』



前歯部審美修復治療に必要なステップを11のチャプターに分類し、各ステップでの必須項目をルール化。全58のルールから学べます。解説されたルールを日常臨床に落とし込むマニュアルとしても最適！症例やニーズに応じたマテリアル選択のルールがわかり、またラボコミュニケーションに必要な情報もルール化して解説した一冊。

- 監著＝小濱 忠一
- 著 二岡崎 伸一／片岡 繁夫／古波蔵 翔
下地 恒太郎／高橋 聡／中島 圭治
中野 環／名取 徹
- 出版＝インターアクション
- 価格＝12,000円＋税

全身疾患やストレスによるリスクは回避できる！

『臨床医のための歯科麻酔テクニック & 全身管理の秘訣』



「これを知らないと・・・、これをやっておかないと危険・・・」来院患者さんの全身のリスク回避が欠かせない時代だからこそ生まれた書。リスク回避のために、歯科医師、歯科衛生士、歯科助手などのチームで知識を共有でき、臨床で本当に必要な知識の整理と、具体的な対策が臨床直結で読める。また、インプラント手術など全身管理が必要な時の歯科麻酔医との身近な連携ができる。

- 監著＝雨宮 啓
CDAC (Clinical Dental Anesthesiologist Club)
- 出版＝インターアクション
- 価格＝9,000円＋税