

UK REPORT

New Products

ジャスティⅣ/ヨシダ ＜歯科用根管長測定器＞



ヨシダから発売された“ジャスティⅣ”は、独自の高精度測定で根尖までの距離を計測する歯科用根管長測定器です。2種類の周波数の組み合わせから、常に整合性を確認する「総合補足測定システム」を搭載。口腔内の環境に影響されず、ドライでもウェットでも測定が可能です。

【特徴】

- 根管内にある側枝を検知し、画面とブザー音でお知らせします。計測可能な側枝は、直径：>0.15mm、高さ：APEXから2.5～5mmです。
- 大画面で鮮やかな画面表示により見やすい画面です。
- ファイルの到達距離が3段階で色分けされており、視認性に優れています。
- ファイルの先端が側枝に到達したときマークが点滅するとともにブザー音でお知らせします。湾曲根管など触診だけでは気づきにくい治療で術者をサポートします。
- 従来のチャンネルインスツルメントホルダーよりもサイズが小さくなったことにより、操作性が向上します。

標準価格＝本体一式 150,000円
チャンネルインスツルメントホルダー5本組 16,000円

ハニガムプロ ファスト/ヨシダ ＜付加重合型シリコン印象材＞



ヨシダから発売中の付加重合型シリコン印象材「ハニガムプロ」に、ファストタイプの“ハニガムプロファスト”が追加ラインナップされました。「ハニガムプロ」の操作時間が2分45秒、硬化時間が3分15秒であるのに対して、“ハニガムプロファスト”の操作時間は1分30秒、硬化時間が2分であり、より時間が短縮されました。同じ症例を複数回印象採得される際に時間が短縮され、さらにチェアタイムの削減にもつながります。

【特徴】

- ハニガムプロファストは、高い流動性があり歯肉溝内深くまで入り込み、印象採得で重要なマージン部の再現性が高く、精度の高い補綴物の作製が可能です。
- 親水性が高く、湿潤下においても精密な印象採得が可能です。
- 口腔内からの撤去時や作業用模型に起こしてもマージン部がちぎれにくいいため、精度の高い補綴物の作製が可能です。

標準価格＝
ライトボディ (50ml×2本) 8,800円
モノボディ (50ml×2本) 8,500円
ヘビーボディ (50ml×2本) 8,190円
モノボディ 380ml
カートリッジ 1本入 16,000円
ヘビーボディ 380ml
カートリッジ 1本入 19,300円

Aadva スキャン F8/ジーシー ＜技工用 CAD/CAM システム＞



ジーシーから発売中の技工用 CAD/CAM システム「Aadva スキャン」シリーズに最新モデル“Aadva スキャンF8”が新たにランナップされました。従来最上位機種と同等の計測精度および計測時間を有し、機内に2つの模型をセットして同時に計測作業が行うことが可能です。

【特徴】

- 複雑なモデリングでもスピーディに設計することができるソフトウェア「Dental Designer」を搭載。クラウン・ブリッジなどの補綴装置をデジタルで設計でき、単純なモデルから複雑なモデリングまで迅速・簡単に設計できます。
- 咬合器プレートを使用することで、計測ルーム内に収まる大きさの咬合器をセットしてバイトスキャンが行えます。
- 3つのパッケージ構成。「C&B」は、クラウンやブリッジ、コーピング、インレー、ラミネートベニア等が設計可能。「Premium」は、C&Bで設計可能な補綴装置に加えテンポラリークラウン、スプリント、個人トレー等が設計可能。「CR」は、Premiumで設計可能な補綴装置に加え、すべてのオプションを含むコンプリートパッケージです。

標準価格＝F8 C&B 4,700,000円
F8 Premium 5,000,000円
F8 CR 5,600,000円

My Recommendation

『コメント MI セラバー K1SM』 ＜モモセ歯科商会＞



標準価格＝単品 1本入 3,600円
単品ロング 1本入 4,200円
CAキット (4種 2本入) 28,800円
CAロングキット (4種各2本入) 33,600円

錆びないラウンドバー！

今回ご紹介致しますのは、(株)モモセ歯科商会から販売しております軟化象牙質除去バー『コメント MI セラバー-K1SM』です。
商品の特徴としまして①感染歯質のみを除去可能②ジルコニアで出来ている為切れ味が良く、耐久性があり滅菌して錆びることがありません③スリムネックになっているので術野が見えやすい作りになっています。
現在ご使用いただいている医院様では、「スチールバーと比べて切れ味が長続きして作業もしやすい。」「滅菌しても錆びないから衛生的で口腔内に入れることに罪悪感がない。」とのお声を頂いております。是非この機会にご検討下さい。詳細につきましては弊社営業担当者にお問い合わせください。

久留米店 営業一課 福澤 貴幸

UK REPORT

@New Topics

★OEM 製品 “バイオハンター100” キャンペーンのご案内！

血液・唾液等の汚れ・バイオフィーム(細菌の温床)を強力に分解除去！！

弊社 OEM 製品として好評発売中のスピットン・バキューム用除菌洗浄剤 “バイオハンター100” (製造元: アムテック㈱) を 10月23日~12月20日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたします。特許成分の配合により、排水パイプやスピットンやバキューム類をいつもクリーンで衛生的に保つことが可能で、金属・プラスチック・ゴム等の材質への影響が極めて少ない除菌洗浄剤です。サンプル品をご提供させていただいておりますので、是非この機会にご用命いただきますようお願い申し上げます。特別価格ならびに詳細につきましては、弊社営業担当までお申し付けください。

【バイオハンター100 の特徴】

- 特許成分配合により、配管に付着した血液・唾液等の汚れ・バイオフィーム (細菌の温床) を強力に分解除去します。
- 臭いの原因菌を徹底除菌します。
- 防錆成分配合で金属部材にも安心して使用できます。
- 廃棄しやすい減容ボトルを採用。
- 50 倍希釈で 1 本 (2 リットル) で 100 リットル分作れます。
- 低発泡性。

UKDENTAL OEM # 11-12 PENETRATION
U K オリジナル製品キャンペーン

キャンペーン期間
2023年 10月23日~12月20日
【キャンペーン期間中は毎日10時までの注文がまだご予約いただけます。】

下配商品を期間限定で **特別価格** でご奉仕いたします。

対象商品 スピットン・バキューム用除菌洗浄剤 **バイオハンター100** 【内容量】2,000ml (標準価格 ¥10,000)

排水パイプやスピットン・バキューム類をいつもクリーンで衛生的に保つことが可能で、金属・プラスチック・ゴム等の材質への影響を極めて少ない洗浄剤です。

特徴
○ 特許成分配合により、配管に付着した血液・唾液等の汚れ・バイオフィーム (細菌の温床) を強力に分解除去します。
○ 臭いの原因菌を徹底除菌します。
○ 防錆成分配合で金属部材にも安心して使用できます。

成分
・酵素、界面活性剤、グリコール系溶剤、キレート剤、防腐剤、消泡剤

使用方法
＜スピットン・排水パイプ＞
① 洗浄剤を注ぎ、スピットン部分から排水パイプにバイオハンター100を200ml~500ml程度注ぎ、30分程度放置してください。
② 排水パイプの排水口から水を200ml~500ml程度流してください。
＜バキューム・排膿管＞
① 洗浄剤を注ぎ、バキュームまたは排膿管にバイオハンター100を200ml~500ml程度注ぎ、30分程度放置してください。
② 洗浄剤、防腐剤をそれぞれ200ml~500ml程度吸引してください。

※標準価格=2L入 10,000円

↓↓↓
特別価格でご奉仕いたします！

@New Books & Video

★今週の新聞


『 TOOTH WEAR 』 ~保存・修復の真髄を求めて~



Tooth Wear を引き起こす酸蝕症・摩耗症・咬耗症・アプフラクシオンの病因や評価、削らずに付加的な処置で歯の修復を図る “additive restoration” の実際、デジタル機器の活用、矯正・インプラント治療の併用、食事や生活習慣改善・適切な歯磨き・マウスガード装着等による対応など、最新情報に基づく治療法を収載。Tooth Wear 患者に対する具体的で実践的な診療システムの構築に役立つ一冊。

- 著 = Debora R.Vilaboa / Beatriz R.Vilaboa / Jose Manuel Reuss / Debora Reuss
- 監訳 = 田上 順次
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 38,000 円 + 税

『 JUSTICE in Dentistry 歯科の正義 』 ~「診断」と「治療」の正義と不正義~

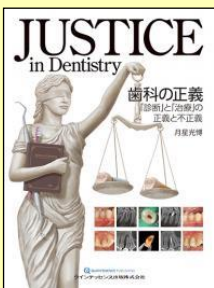

歯科の正義とは？歯科の不正義とは？歯科で重要になるのは「診断」と「治療」の正義である。本書で紹介する治療の共通点は「生体を守ること」をゴールにしたことであり、このことはできるだけ、削らない、抜髄しない、抜歯しないという MI (ミニマルインターベンション) の概念とマッチし、多くの読者に受け入れられる理由の 1 つになるのかもしれない。現在の最新の知見・資料を追加したこれまでの著者の論者の集大成！

- 著 = 月星 光博
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 19,000 円 + 税


『 インプラント補綴マニュアル 』 ~パーツで困ったときの取扱説明書~



インプラント補綴の成否を分けるのは、「パーツの取り扱い」と言っても過言ではない。本書では、元 UCLA 臨床教授の Schoenbaum 氏が、アバットメントや印象用コーピング、各種スクリュー、ドライバーにトルクレンチをはじめ、インプラント補綴に用いられる器具・器材の扱い方を徹底的に解説。主要メーカーの製品をもとにした臨床ステップごとの説明に加え動画も付属する、インプラントパーツにフォーカスしたかつてない一冊。

- 著 = Todd R.Schoenbaum
- 監訳 = 五十嵐 一 / 近藤 尚知 / 森本太一郎
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 23,000 円 + 税

『 始めよう！極めよう！マイクロスコープ 』 ~その仕組み・使い方と各分野の治療が上達するための5STEP~

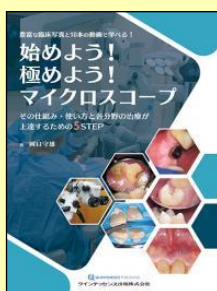

本書では、マイクロスコープをしっかりと学びたい初心者から、さらに治療の質を高めたい経験者まで、多くの歯科医師が活用・上達できるように5つのステップで解説。また、歯科の各分野でマイクロスコープを活用できるように豊富な臨床例とともに術者・患者・マイクロスコープのポジショニングについても提示。マイクロスコープの活用法が、多くの臨床写真と図、10本の動画から学べる一冊。

- 著 = 岡口 守雄
- 出版 = クインテッセンス出版
- 価格 = 14,000 円 + 税