

# UK REPORT

## New Products

### ジェラルD-Lux Pen/ヨシダ ＜歯科重合用光照射器＞



ヨシダから発売された“ジェラル D-Lux Pen”（アンジェラスジャパン）は、直径11mmの照射部に4つのLEDを組み込むことで均一な光分布を実現したLED光照射器です。ヘッド部の厚みは約9mmと薄く、臼歯部の照射も容易です。また、照射用レンズの最適化により、光の集光性・直進性をはかり、広範囲かつより深部への照射を可能にしました。

【特徴】

- 多機能でハイパワーを実現。光量は2,300、1,500、1,000mW/cm<sup>2</sup>の3種類から選択が可能で、また、う蝕やクラックの視覚的な検知サポートが可能なサポートモード（600 mW/cm<sup>2</sup>）も搭載。
- 光重合の波長域は440～515nm、サポートモードの波長域は385～430nmです。
- LEDヘッド部は360°回転可能で、さまざまな部位に簡単に照射できます。
- 約100gの軽量、また優れたデザイン性により、使い勝手がよく、照射性に優れています。
- 専用スリーブで清潔な診療が可能です。

標準価格＝本体一式 55,000円

### コメット FSQ カッター /モモセ歯科商会 ＜PEEK・ハードアクリル用 カーバイドカッターHP＞



モモセ歯科商会から発売された“コメット FSQ カッター”は、アクリルやPEEKなど硬いレジンに独自のクロスカットで効率的に切削することが可能なカーバイドバーです。切断面にバリが出づらいうレドデザインで、滑らかな切削面が得られ、研磨も容易です。


【特徴】

- レジンに適したブレードで、高い切削力と滑らかな切削面が得られます。
- 深い溝なのでからみつきが少ない。
- 軸ブレしないので安定した使用感が得られます。
- 硬いアクリルやPEEKの内面調整、サポートの除去、咬合面の調整に有効です。
- 全11形態をラインナップ。



標準価格＝6形態 4,000円  
5形態 5,400円

### フロスペン & フロスモ /日本歯科商社 ＜デンタルフロス＞

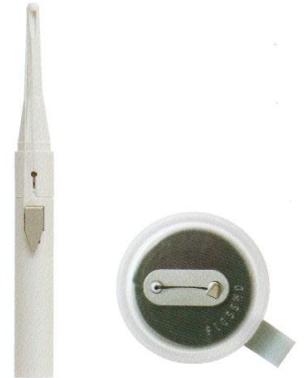

日本歯科商社から発売された“フロスペン”ならびに“フロスモ”は、イタリア製の柔らかいファイバーフロスを採用し、狭い歯間にもスッと挿入しやすい、絶妙な細さと繊維数のデンタルフロスです。288本の極細繊維が歯間や歯肉溝にも優しく入り、しっかりと歯垢を絡めとります。

【フロスペンの特徴】

- フロスペンは、誰でも簡単にロールタイプのフロスを使ってお口の清掃ができます。細身のヘッドが奥歯の歯間にラクに届くので、フロスの難しさが生じていた“面倒さ”を軽減し、習慣化につながります。

【フロスモの特徴】

- フロスモは、壁面に貼って使う新しいかたちのデンタルフロスです。置き場所を固定できる、つねに目につく場所に置けるため毎日の習慣化ができる歯みがきに加えて、フロスと一緒に歯垢を意識することができます。

患者参考価格＝

フロスペン 880円（税込）  
フロスモ 660円（税込）

## My Recommendation

### 『エナメラスト』 ＜ウルトラデントジャパン＞



標準価格＝シリンジ（2本入） 2,800円  
ユニドース（50入） 13,600円

### 大切な歯を長期的に守る知覚過敏抑制材！

今回ご紹介させていただく製品は、ウルトラデントジャパン様より発売しております『エナメラスト』です。エナメラストは、フッ化ナトリウム5%を含むパーニッシュで、特殊なレジンキャリアーを使用し、フッ化物を歯面に停滞させ知覚過敏を抑制します。露出した根面やスクーリング・SRP後、ホワイトニング前後など幅広い症例に適用可能であり、塗布後の表面も滑らかに保つことができます。

ご使用いただいております先生からは、「オフィスホワイトニングの後によく使用しているが、これまで使用した製品よりも効果が高い。」とお声を頂いております。ウルトラデント独自のウォーターブルーベリーフレーバーで、多くの世代に人気です。また、お好みの量で使用可能なシリンジタイプ使い切りで衛生的なユニドースタイプの2種類からお選びすることができます。是非この機会にお試し頂ければと思います。製品の詳細につきましては弊社営業担当者にお問い合わせ下さい。

熊本店 営業一課 西 俊彦

# UK REPORT

## @New Topics

### ★UK オリジナルキャンペーンのご案内！

#### クラスB 滅菌に対応した高品質でリーズナブルな滅菌バッグ！


弊社では、UK オリジナルキャンペーンといたしまして、ARメディコム・インク・アジア・リミテッドから発売されております「セーフベーシック滅菌シールパウチならびに滅菌ロール」を3月31日までの期間中、特別価格にてご奉仕いたしております。高品質なのにリーズナブルな滅菌バッグを是非一度お試しくださいようお願い申し上げます。サンプル品もご用意しておりますので、詳細につきましては営業担当者までお気軽にお尋ねください。

#### 【セーフベーシック 滅菌シールパウチ & 滅菌ロールの特徴】

- ISO11140・Type1 のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。
- ISO11607、EN868 に準拠した性能要求テストをクリア。
- 内容物の見やすい透明フィルムを採用。
- 環境にやさしい水性インクを採用。
- 「セーフベーシック滅菌シールパウチ」は、ヒートシーラー不要の強力粘着テープ式です。
- 「セーフベーシック滅菌ロール」は、非滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能。また、専用のディスペンサー不要のボックス入り仕様。(専用のシーラーが必要です)



▲セーフベーシック滅菌シールパウチ

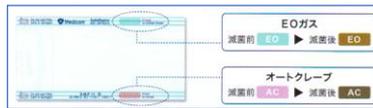

▲セーフベーシック滅菌ロール

製品名	規格	滅菌前	滅菌後	価格
セーフベーシック滅菌シールパウチ	S	50mm×200mm	30mm	100円
	MS	75mm×200mm	30mm	150円
	M	100mm×200mm	30mm	200円
	L	125mm×200mm	30mm	250円
	LL	150mm×200mm	30mm	300円
	LLL	175mm×200mm	30mm	350円
セーフベーシック滅菌ロール	S	50mm×200mm	30mm	100円
	MS	75mm×200mm	30mm	150円
	M	100mm×200mm	30mm	200円
	L	125mm×200mm	30mm	250円
	LL	150mm×200mm	30mm	300円
	LLL	175mm×200mm	30mm	350円

特別価格でご奉仕いたします！

## @New Books & Video

### ★今週の新刊

#### 『象牙質知覚過敏症 第4版』

～目からウロコのパーフェクト治療ガイド～



象牙質知覚過敏症治療の定本、7年ぶりの待望の改訂。第3版の時点(2017年)からリニューアルされた製品も含め、現在容易に入手できる知覚過敏抑制材をほぼすべて収載(38製品)。また、令和2年度診療報酬改定で追加された「象牙質レジンコーティング」の基礎的考え方と臨床ステップについても掲載。知覚過敏を主訴とする患者さんへのパーフェクトな治療ガイド本。

- 編著=富士谷 盛興
- 出版=医歯薬出版
- 価格=3,900円+税

#### 『医療・保健スタッフのための健康行動理論 実践編 第2版』

～生活習慣病の予防と治療のために～



健康行動の諸理論を医療現場に応用する方法について、工夫を凝らして具体的に提示する実践テキスト。食事療法、運動療法、薬物療法といった事例に加え、改訂版では禁煙勧奨の章を新設し、場面別に解説。全編にわたって内容や表現を徹底的に加筆修正し、新規コラムも多数追加し、より見やすく分かりやすい紙面に刷新した一冊。

- 著 = 松本 千明
- 出版=医歯薬出版
- 価格=1,900円+税

#### 『義歯治療こんなときどうする?』

～診療室・訪問現場で困ったときのセオリーとポイント～



義歯治療において、「こんなときどうする?」を解決するための理論とポイント集。辺縁封鎖、咬合採得、レストの調整、リライニングまで、義歯製作のためのセオリーを活用しつつ「動かない義歯」を目指した書。訪問診療の現場でも活用できる全身疾患のポイントも収載し、さまざまな場面で活用できる一冊。

- 監修=水口 俊介/戸原 玄
- 執筆=竹前 健彦/並木 千鶴/今田 良子
- 出版=医歯薬出版
- 価格=5,400円+税

#### 『臨床家のための床矯正治療 不正咬合別のアプローチ①』

～叢生・上顎前突・過蓋咬合～



小児期の患者に対する床矯正治療について解説し、バイオフィUNCTIONALセラピーとメカニカルな治療の方法を不正咬合別に詳述。叢生・上顎前突・過蓋咬合について症例を提示しながら解説。小児歯科に興味をもつ開業医には必読の一冊。

- 著 = 花田 真也
- 出版=医歯薬出版
- 価格=9,000円+税