

# UK REPORT

## New Products

ステリリンクU510  
／大栄歯科産業  
＜過酸化水素ガス滅菌器＞



大栄歯科産業から発売された“ステリリンクU510”は、省スペースで、クリニックニーズに対応できる過酸化水素ガス滅菌器です。

【特徴】

- 急速昇温制御システムによる高速滅菌が可能です。
- 滅菌による温度上昇はわずか 60℃以下です。
- φ0.7mm×500mm ステンレススチール (3EA) の内腔医療機器も滅菌可能です。
- ワンタッチでモード選択とスタートが可能なシンプルデザインです。
- スタンダードモードは 18 分、アドバンスモードでは 31 分で滅菌が可能です。
- 30cc の過酸化水素で 20 回の滅菌ができます。

標準価格＝本体一式 1,680,000 円  
カートリッジ (2 個入) 20,000 円

フォグノ/デントロニクス  
＜口腔内撮影用ミラー防曇ファン＞



デントロニクスから発売された“フォグノ”は、口腔内写真撮影時のミラーの曇りを抑える防曇ファンです。

【特徴】

- おだやかな送風が、口腔内写真撮影時のミラーの曇りを軽減します。
- 本体裏面のアームで、多くのミラーに取り付けが可能です。
- 送風口の左右に LED ライトを設け、撮影をサポートします。
- 一回の充電で 5 分×10 回の使用が可能です。
- 約 100g と軽量で、コンパクトな設計です。
- 5 分間で自動的に送風をストップします。

標準価格＝本体のみ 29,800 円

メルサーージュ プロフェッショナル  
ケアシリーズ／松風  
＜PMTC ペースト＞



松風から発売された“メルサーージュ プロフェッショナルケアシリーズ”は、プロの技術に応える4種のPMTCペーストです。

【特徴】

- プロ ワンペーストは「ステイン除去」から「仕上げ」までワンステップで歯面を傷つけず、クリーニングできます。
- プロ TT プラスは天然歯・修復物・補綴装置に使用できるトリートメントペーストです。
- プロ AP プラスは卵殻由来の「ヒドロキシアパタイト」を配合した清掃剤です。
- プロ ステインオフはナチュラルミント味のポリッシングペーストです。

標準価格＝  
プロ ワンペースト (65g) 2,000 円  
プロ TT プラス (40g) 1,800 円  
プロ AP プラス (65g) 2,900 円  
プロ ステインオフ (40g) 1,800 円

## My Recommendation

『デントロ クリーンムース』  
＜デントロニクス＞



患者参考価格＝1 本 (150ml) 1,320 円 (税込)

### ムースタイプの洗浄剤で安定剤を強かに除去！

今回ご紹介させていただきます商品は、株式会社デントロニクスより発売されております『デントロ クリーンムース』です。義歯安定剤の除去に優れた能力を発揮する、ムースタイプの入れ歯洗浄剤です。

特徴として、強力洗浄で特にクリームタイプの安定剤を溶解除去でき、入れ歯の洗浄が容易です。IPMP (イソプロピルメチルフェノール) を配合し、口腔内細菌から真菌まで除去できます。クールミントの香りです。フルデンチャー、パーシャルデンチャー、ノンクラスデンチャーに使用可能で、さらに入れ歯だけでなくマウスピース、矯正用リテーナー等にもお使い頂けます。

ご購入いただいている医院様からは、「義歯安定剤の除去も簡単にできるため非常に便利。」とお言葉をいただいております。是非この機会にお試しいただきたい商品となります。詳細につきましては弊社営業担当者までお問い合わせください。

長崎店 営業二課 坂井 和樹

# UK REPORT

## @New Topics

### ★ UK オリジナル製品“UK ネクストクリンⅢ”キャンペーンのご案内！

#### 1つの液で3つの効果 洗浄！ 除菌！ 防錆！

弊社オリジナル製品でご好評をいただいております歯科用小器具洗浄除菌防錆液の“UK ネクストクリンⅢ”を8月20日までの期間中、特別価格にてご提供させていただきます。“UK ネクストクリンⅢ”は、蛋白質分解酵素を配合し、優れた洗浄力で、血液、脂肪、蛋白質、膿汁などの有機物を除去する歯科用小器具洗浄除菌防錆液です。この機会に是非ともご用命の程宜しくお願いいたします。詳細につきましては弊社営業担当者までお申し付けください。

#### 【UK ネクストクリンⅡの特徴】

- 洗浄成分に蛋白質分解酵素を加えることで洗浄力がアップしました！
- CAE、アルキルジアミノエチルグリシンによる確実な除菌効果を発揮します。
- 非亜硝酸系有機防錆剤の配合により、金属の腐食発生を防止します。
- ミントの爽やかな香りで嫌な臭いを軽減します。
- 幅広い濃度で使用できるためとても経済的です。

【容量】4000ml 【標準価格】9,700円

※特別価格につきましては営業担当者にお尋ねください！

特別価格でご奉仕いたします！

UK DENTAL OEM PENETRATION 6/23 - 8/20

2025年6月23日～2025年8月20日 以下商品を期間限定で特別価格でご奉仕いたします。

対象商品 歯科用小器具洗浄除菌防錆液 UKネクストクリンⅢ

優れた洗浄力で血液、脂肪、蛋白質、膿汁などの有機物を除去する歯科用小器具洗浄除菌防錆液です。

**特長**

- 強力な洗浄力** 洗浄成分に蛋白質分解酵素を加え、洗浄力がアップしました。
- 確実な除菌力** CAE、塩化セチルピジニウムによる確実な除菌効果を発揮します。
- 安心の防錆力** 非亜硝酸系有機防錆剤の配合により、金属の腐食発生を防止します。
- プラスの効果** ミントの香りで嫌な臭いを軽減します。

**さらに経済的** 幅広い濃度で使用できるため経済的です。

**用途** 歯科用小器具の洗浄、除菌及び防錆。メタル器具表面の洗浄及び除菌。

**成分** 高濃度アルコール系・イオン界面活性剤 CAE・塩化セチルピジニウム (CPC) 非亜硝酸系有機防錆剤 蛋白質分解酵素、香料

**使用方法**

- 小器具 (リーマー、パー) 深溝洗浄 2～10分希釈液に10分浸漬した後、充分すすいでください。 超音波洗浄機 10～20分希釈液で10分洗浄してください。
- 器具類 (インスツルメント) 深溝洗浄 20～100分希釈液で30分以上浸漬した後、充分すすいでください。 超音波洗浄機 100～200分希釈液で10分洗浄してください。


内容量：4,000ml (標準) 標準価格：¥9,700 (標準)

危険 にご使用前に必ず「使用上の注意」と「注意・留意」をお読みください。

## @New Books & Video

### ★今週の新聞

#### 『インプラント周囲炎を紐解く』 ～診断・予防・管理のすべて～

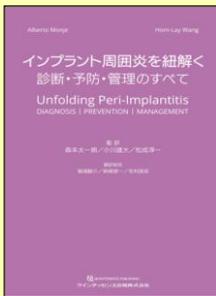

本書では、世界のインプラント周囲炎治療のスペシャリスト、Frank Schwarz 氏、Stefan Renvert 氏ら39名が自身のインプラント周囲炎症例を惜しみなく提供。それらを基に、診断・予防・管理の観点から、臨床に即した実践的なアプローチを、最新のエビデンスと治療戦略を交えながら網羅的に紹介。インプラント周囲炎治療の予後向上を図るための「ノウハウ」がすべてこの1冊に詰め込まれた一冊。

- 編集=Alberto Monje/Hom-Lay Wang
- 監訳=森本太一朗/小川 雄大/松成 淳一
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=60,000円+税

#### 別冊 ザ・クインテッセンス/Quint-Med 『口腔外科 YEARBOOK 一般臨床家、 口腔外科医のための口腔外科ハンドマニュアル25』



巻頭特集では、改訂中のガイドラインをふまえた顎顔面外傷の診断と治療について、臨床に役立つ情報を解説。そのほか、歯性上顎洞炎の診断と治療、高齢患者へのインプラント治療、下顎歯肉癌の再発を減らす手術法の工夫、中高年患者への顎変形症治療、周術期等口腔機能管理の実際、口腔乾燥症の新分類と診断・治療、抗菌薬投与のポイント、向精神薬の見方と注意点など、知識と技能の習得に役立つ情報を多数掲載。関係者必携の一冊。

- 編 =公益社団法人 日本口腔外科学会
- 編集=池邊 哲郎/桐田 忠昭/原田 浩之
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,600円+税

#### 天野ドクターの歯周病絵本② 『歯周病と全身の病気のお話』



歯周病は全身の健康を脅かす怖い病気だが、歯周病と全身の病気の関係は複雑で、理解が難しい。そこで、歯周病が体内でどのような悪さをするかをグラフィカルな「絵物語で説明」し、さらに「医療視点の解説」を加えたのが本書。歯周病菌 (Pg 菌) とともに人間の体の中をめぐる、血管、肺、心臓、脂肪、すい臓、肝臓、関節、腸、脳への歯周病の影響を見ていく。患者向けの待合室図書としてはもちろん、スタッフ教育にも役立つ一冊。

- 著 =天野 敦雄
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=4,200円+税

#### 別冊 ザ・クインテッセンス 『骨補填材料 & メンブレン YEARBOOK 2025/2026』 ～最新のマテリアルと文献から紐解く～



2025年現在、日本国内において骨補填材料とメンブレンを製造・販売している主要9社が参画。中でもメガジェン Bone Matrix I は国内初 HA+β-TCP の混合骨補填材料として、リフィットデンタルはインプラント適応材料として新たに認可され、要見。巻頭企画では「歯周組織再生療法およびインプラント治療における骨補填材料・メンブレンのシステマティックレビューから紐解く文献的・臨床的評価」は読み応え十分の一冊。

- 監著=丸川恵子/岩野 義弘
- 出版=クインテッセンス出版
- 価格=6,300円+税

