

コードレスエンドモーター

CANALPro X-Move

根管長測定器一体型



*バッテリー、コントラヘッドのみ
1年保証



実物大
8mm



用途自由自在:

すべてのファイルシステムに対応

さらに、コルテンファイルシステムが
プログラムされています

実物大
約200mm

 COLTENE

作業モード

CW	時計回りの正回転モード
CCW	反時計回りの連続逆回転モード
REC	レシプロケーション回転モード
ATR	アダプティブトルクリバースモード
EAL	エレクトロニックエイペックスロケーター EMRモード(根管長測定器)

根管長測定器メニュー

Apical Action (アピカルアクション)

OFF	機能停止
STOP	作業長に到達すると回転が停止します。 作業長からファイルを離すと自動的に回転が再び始まります。
REVERSE	作業長に到達するとファイルは設定回転方向の逆回転になります。 作業長からファイルを離すと回転方向が元の設定回転方向に戻ります。

Apical Slow Down (アピカルスローダウン)


OFF	CWモードのみで機能停止
ON (低速設定)	作業長に近づくと回転数は設定最低速度まで落とします。 CW & CCWモードのみで使用可能。

Auto Start / Auto Stop (オートスタート・オートストップ)

Auto Start OFF	オートスタート機能停止
Auto Start ON	ファイルが根管に入ると、自動で回転します。


Auto STOP OFF オートストップ機能停止

Auto STOP ON ファイルが根管外に引き出されると自動で回転が停止します。

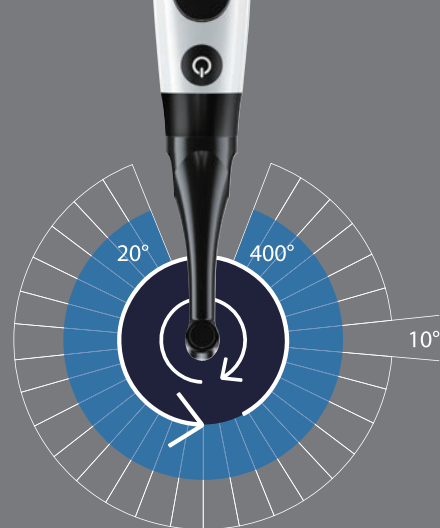

【設定範囲】

回転数	100rpm ~ 2500rpm
トルク	0.4Ncm ~ 5.0Ncm
回転角度	20° ~ 400°
回転角度単位	10°

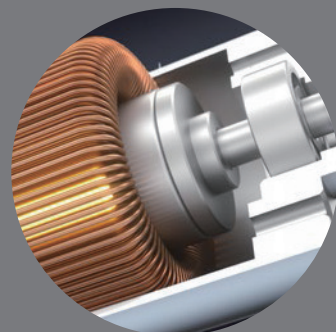

ブラシレスモーター技術により振動やノイズを低減

その他ベネフィットコーナー

- ◆ 絶縁性コントラアングル
≫ 精度の高い作業長測定
- ◆ マットブラックコントラ
≫ 顕微鏡やルーペライトが反射しにくい
- ◆ スーパーミニコントラヘッド(8mm) & ネック(6mm)
≫ 口腔内が見やすい・動作しやすい
- ◆ 360度回転フリー ヘッド設計
- ◆ スリーブ無し使用可能
- ◆ 左利きユーザー設定




Order Information

CanalPro X-Move Box

標準価格198,000円

65002739	1×ハンドピース 1×充電ベース 1×コントラアングル 1×注油ノズル 1×プローブコード 4×ファイルホルダー 2×リップクリップ 2×プローブ 4×"O" リング 1×ACアダプター 1×バッテリー	本体・コントラ単品、アクセサリ
65002742	1×ハンドピース	
65002743	1×充電ベース	
65002744	1×コントラアングル	
65002745	1×注油ノズル	
65002746	1×ACアダプター	
65002747	1×プローブコード	
65002748	4×ファイルホルダー	
65002749	2×リップクリップ	
65002750	2×プローブ	
65002751	4×"O" リング	
65002752	1×バッテリー	

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

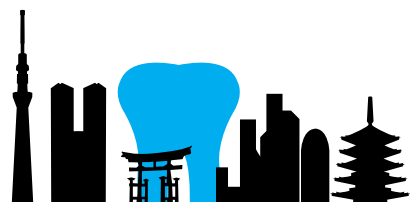

コルテンジャパン
公式SNSアカウント



コルテンくん
LINE
キャラクター



取扱説明書
ダウンロード

販売元
コルテンジャパン合同会社
〒190-0012
東京都立川市曙町2丁目25-1
TEL: 042-595-6945
FAX: 042-595-6946
www.coltene.com

選任製造販売業者
AJMD 株式会社
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-4-5
真光ビルディング
TEL: 03-5614-0733
FAX: 03-5614-0734

販売名: CanalPro X-Moveエンドモーター 認証番号: 306AKBZ100063000

COLTENE