

トルクラチェットレンチプラス マルチドライバセット(ロング・ショート) トルクレンチLight


どのインプラントにも**ユニバーサル**に使える
正確なトルクがわかる

KTCメディカルとは
動画でわかる歯科界での
トルク管理の重要性



■トルク管理が合併症リスク低減につながります

オーバートルクで締め付けたスクリュー
規定トルク内でアパットメントス
クリューを締め付けることで、ネジの
変形を防ぎオーバートルクによる弊
害を避けることができます。

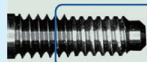

ネジ山の
形状劣化発生
締め過ぎ
強度低下
緩み・破損
トラブル発生

初期固定には **NEW**
KTCツールで適正なトルクを!

コンパクトヘッド&ロングに改良!!

最大
100
N・cm
ギヤ歯数
48枚
7.5°

適用
マルチドライバ(4mmsq.)




ダイレクトに接続可

マルチドライバ

トルクラチェットレンチ
プラス

■トルクラチェットレンチプラス


- 高トルク域計測の即時荷重に。
- 全てのコントラ用ハンドピースと接続可能。(オプションレンチアダプタ別売)

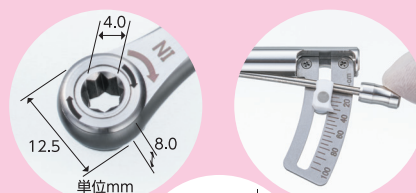

外科・補綴用途(メンテナンス)

インプラント補綴の **NEW**
メインテナンスに最適!

ドライバにロング/ショートを追加!!

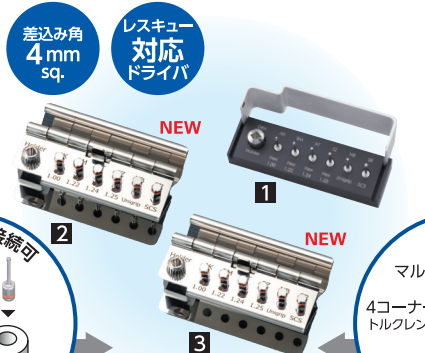

1 マルチドライバセット
2 マルチドライバセットロング
3 マルチドライバセットショート

- 初診救急の新規患者さまでもすぐにレスキュー対応。
- スムーズな手技操作で最適フィットで安心。



補綴・メインテナンス用途

補綴から即時荷重埋入・撤去まで
マルチに使用可能!

インプラントシステムメガジェン標準!

最大
80
N・cm
丸(φ7mm)
タイプ
規格ツール

適用
マルチドライバ(4mmsq.)



接続可
マルチドライバ
4コーナーアダプタ
トルクレンチLight入組

■トルクレンチLight

- 軽くて丈夫なPEEK(樹脂)素材で軽量で高耐久性。
- ジンヴィインプラント等はアダプタ無しでもツール接続可能。
- 緩め方向でもトルク測定が可能。



三角頂点部
三角頂点部に到達した値を
読み取りトルク値を把握。



外科・補綴用途(メンテナンス)

マルチドライバセットのドライバ(差込み角4mmsq.)は当社のすべての計測ツールに接続可能です。

緩みのない補綴、初期固定には、KTCツールで適正なトルクを!

工具メーカー品質のトルクラチェット。一本でどのインプラントシステムにも対応


ビーム式トルクレンチ



外科や補綴において臼歯・隣在歯箇所に効果

- コンパクトヘッド&ロング仕様に改良
＜当社トルクラチェットレンチ比＞
- 高トルク域計測の即時荷重に
- ピーク値の置き針採用で読取りミス低減
- 全てのコントラ用ハンドピースと接続可能
- マルチドライバセットと接続可能

2種のアダプタを介して全てのコントラハンドピースと接続可能。

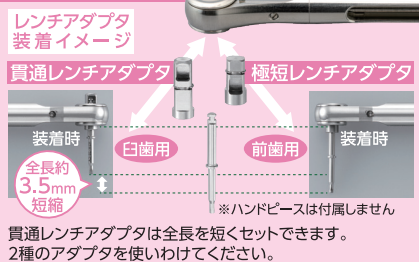

一般医療機器 販売名: トルクラチェットレンチプラス
医療機器届出番号: 26B3X10009230001
一般医療機器 販売名: レンチアダプタ
医療機器届出番号: 26B3X10009130011

■ 本 体: トルクラチェットレンチプラス NEW 定価 ¥89,100 (税込)
■ 専用アダプタ: 貫通レンチアダプタ 定価 ¥18,700 (税込)
: 極短レンチアダプタ 定価 ¥18,700 (税込)

【お持ちのCAバーをお使いの際は、専用のレンチアダプタのいずれかをお選びください】



最大
100
N·cm
ギア歯数
48枚
7.5

オートクレープ
135℃対応



20~100N·cm

外科はメガジェンユーザー様マストアイテム。補綴ではマルチドライバとの組み合わせに最適

ビーム式トルクレンチ



即時荷重やインプラント撤去に

- マルチドライバと接続し補綴の締結が完結
- 外科用途は80N·cmまでカバー
- 軽量かつ丈夫なPEEK樹脂製
- ジンヴィンインプラント等はアダプタ無しでも接続可
- 4mmsq.変換アダプタ付属

マルチドライバとセットで
補綴メンテナンスが容易



一般医療機器 販売名: トルクレンチLight
医療機器届出番号: 26B3X10009200001

ダイレクト接続可能ツール



Straumann
・SCSスクリッドドライバー
・アバットメント用挿入ジグ等
ZimVie
・トルクラチェットドライバー
・トルクチェーンインサート
ドライバー等

最大
80
N·cm
軽量
11.5g



オートクレープ
135℃対応



15~80N·cm

■トルクレンチLight

定価 ¥49,500 (税込)

あらゆるインプラント補綴のメンテナンスに最適!ドライバ長の品ぞろえ充実で適用拡大

補綴メンテナンスツール




アバットメントスクリューをしっかりとキャッチ

- ドライバ先端6形状で30を超えるシステムをカバー
- アバットメントの深い位置のアバットメントスクリューはロングドライバで対応
- 臼歯部でクリアランスが無いケースはショートドライバでカバー
- ドライバとアバットメントスクリューが最適フィットで扱いがスムーズ

一般医療機器 販売名: マルチドライバ
医療機器届出番号: 26B3X10009170022

一般医療機器 販売名: マルチドライバセット ロング・ショート
医療機器届出番号: 26B3X10009250001

適用インプラントシステム	形状
SCS (ストローマンタイプ)	オリジナル形状 SR
Unigrip (ノーベルバイオケアタイプ)	オリジナル形状 NB
Hex1.25SZ (ジンマータイプ)	ヘックス1.25mm SZ
Hex1.24AT (アストラテックタイプ)	ヘックス1.24mm AT
Hex1.22BM (3i タイプ)	ヘックス1.22mm BM
Hex1.00AK (アンキロタイプ)	ヘックス1.00mm AK

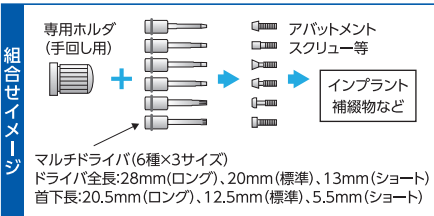

専用ホルダ (手回し用) + アバットメントスクリュー等 → インプラント補綴物など

差込み角
4mm
sq.



オートクレープ
135℃対応



- 1 マルチドライバセット 定価 ¥50,600 (税込)
- 2 マルチドライバセットロング NEW 定価 ¥54,560 (税込)
- 3 マルチドライバセットショート NEW 定価 ¥49,280 (税込)

【製造販売元】

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034
京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
TEL: 0774-46-3804

KTCの歯科用インプラント機器類の詳細情報は
KTCメディカルサイトよりご覧いただけます。

KTCメディカル

検索



<https://medical.ktc.jp/>

モバイルサイト

【販売代理店】

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町6-35
TEL: (06) 6773-3333 FAX: (06) 6773-3361

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2
TEL: (03) 3835-2653 FAX: (03) 3835-2596

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂6-24-21
TEL: (092) 575-6060 FAX: (092) 575-5002

<http://www.momose-dm.co.jp>

■お問い合わせは信頼とサービスを誇る当店で