


株式会社UKデンタル

機械室点検強化活動実施のお知らせ

／ その違和感見逃せないサインかもしれません ／

- ✓ エアーの力が弱くなったような気がする
- ✓ 最近どうも音がうるさくなった
- ✓ エアーに水が混じる
- ✓ エアー使用時になんか臭う

機械室は医院の心臓部です
なにかあってからでは大変
万が一に備えておきたい
歯科医院様の健康診断です

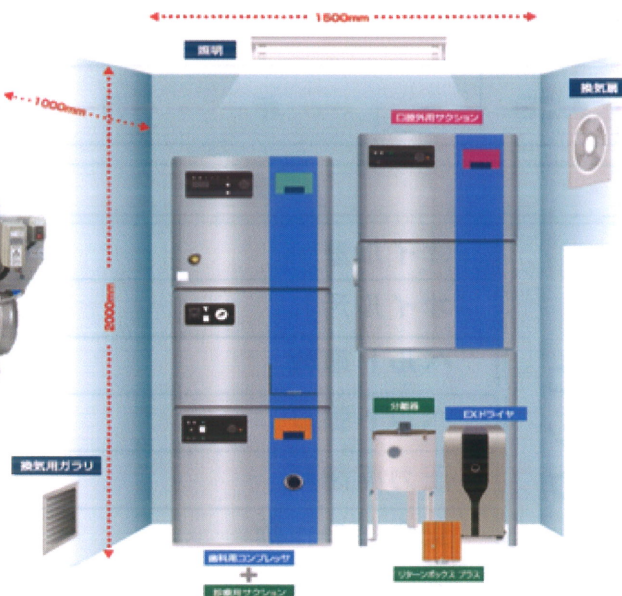

機械室の定期的な点検が歯科医院の健康維持の第一歩

■ 機械室点検内容

※点検後は機械室点検シートにて機械室の状態をご報告させていただきます。

【コンプレッサー】

- ☐ オイルの量
- ☐ オイルの汚れ
- ☐ ベルト摩擦
- ☐ ベルト張り
- ☐ 圧力開閉器
- ☐ 安全弁の作動
- ☐ モーターの回転
- ☐ 吸引フィルターの汚れ
- ☐ エアー漏れ
- ☐ 異常音



☐ 異常振動

☐ 設置環境

【ドライヤ】

- ☐ オートドレンの作動
- ☐ ファンの回転
- ☐ 冷凍機の作動
- ☐ エアー漏れ
- ☐ 冷媒圧力

【周辺機器】

- ☐ エアートラップの作動
- ☐ トランスフォーマーの調整圧力
- ☐ トランスフォーマーの水抜き
- ☐ エアーホースのエアー漏れ

当日の点検作業時間は
約10分程度で終了し
ます。診療時間も点検
作業は可能です。

点検費用は無料です

※点検にて部品交換が発生した場合、交換部品等のみご請求させていただきます



機械室点検申込み

※点検日は後日担当営業よりご連絡致します。

申込日 令和 年 月 日

貴医院名

弊社担当営業名 ()

点検希望日

◆希望曜日 月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金

◆希望時間帯

() 時 () 分 ~ () 時 () 分

機 械 室 点 検 シ ー ト

受付日 令和 年 月 日

受付依頼No. _____

医院名	歯科医院	所在地	
メーカー		台数	台
型式		実施者	
点検日	年 月 日	会社名	株式会社ユーケイデンタル 店

項 目		結 果	備 考
コンプレッサー	オイル量	要交換 / 正 常	
	オイル汚れ	要交換 / 正 常	
	ベルト摩耗	要交換 / 正 常	
	ベルト張り	要交換 / 正 常	
	圧力開閉器	要交換 / 正 常	
	安全弁の作動	要交換 / 正 常	
	モーターの回転	要交換 / 正 常	
	吸込フィルターの汚れ	要交換 / 正 常	
	エアー漏れ	要交換 / 正 常	
	異常音	要交換 / 正 常	
	異常振動	要交換 / 正 常	
	設置環境	要交換 / 正 常	

メーカー名・型式

ドライヤ	オートドレンの作動	要交換 / 正 常	
	ファンの回転	要交換 / 正 常	
	冷凍機の作動	要交換 / 正 常	
	エアー漏れ	要交換 / 正 常	
	冷媒圧力	要交換 / 正 常	
周辺機器	エアートラックの作動	要交換 / 正 常	
	トランスフォーマーの調整圧力	要交換 / 正 常	
	トランスフォーマーの水抜き	要交換 / 正 常	
	エアーホースのエアー漏れ	要交換 / 正 常	
		要交換 / 正 常	

コメント	確 認 欄	
	お客様	担当者